

Товарный чек/Гарантийный талон



Дата продажи


Место продажи

№	наименование и код товара	серийный номер	кол-во	цена	сумма	гарантия
	Массажер для ног ПАНДА CH-630				12 мес	

ИТОГО:  
сумма прописью

М.П.

Подпись продавца

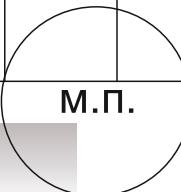

Срок гарантии указан в гарантийном талоне. Без штампа магазина гарантийный талон не действителен.

Инструкция на русском языке получена. С комплектностью ознакомлен. Информация о товаре и сроке службы доведена продавцом в полном объеме. Комплектность и технические характеристики проверены в присутствии покупателя. Стороны пришли к соглашению о сроке гарантийного ремонта товара в течение 30 рабочих дней.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя

Гарантийное и постгарантийное обслуживание продукции осуществляется сервисным центром:

г. Н.Новгород  
ООО "Компания ЧИОС"

Адрес: 603006, Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 220.

Т: (831) 436-31-31; (831) 413-61-61

e-mail: info@chios.ru

[www.chios.ru](http://www.chios.ru)

Массажер для ног ПАНДА AllRest,  
серия CH. Модель CH-630

Генеральный дистрибутор AllRest LTD в России «Компания Чиос»,  
603006, Россия, Н.Новгород, ул. М. Горького, 220. [www.chios.ru](http://www.chios.ru)  
т: (831) 413-61-61; т/ф: 436-31-31

Изготовитель: AllRest LTD, № 121, Guangyan West Road, Baiyun District  
Guangzhou Meibo City, China

AllRest LTD, №121, Гуандун Вест Роуд, Байюнь, Гуанчжоу, Китай



в. 2013.12.02.

Благодарим Вас за приобретение продукции AllRest (Hong Kong). Перед началом использования просим Вас внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.



ПАНДА

Массажёр для ног  
AllRest CH-630




### Инструкция по эксплуатации.

Разминающий и шиацу массаж акупунктурных точек от пальцев до пятки. Расслабляющий воздушный массаж. Комбинация роликового и ударного массажа. 2 уровня интенсивности массажа. Автоматический и ручной режим работы. Регулировка температуры нагрева от низкой до высокой. Таймер автоматического отключения по истечению 15 минут работы. Мощность 50 Вт, безопасность и надежность. Эргономичный дизайн.

### Противопоказания к использованию

Люди с электронными стимуляторами сердца и беременные женщины должны проконсультироваться с врачом перед использованием этого прибора. Не рекомендуется использовать прибор лицам, страдающим сахарным диабетом. Не используйте прибор непосредственно на опухших или воспаленных участках тела или при высыпаниях на коже.

### Внешний вид прибора и порядок работы и

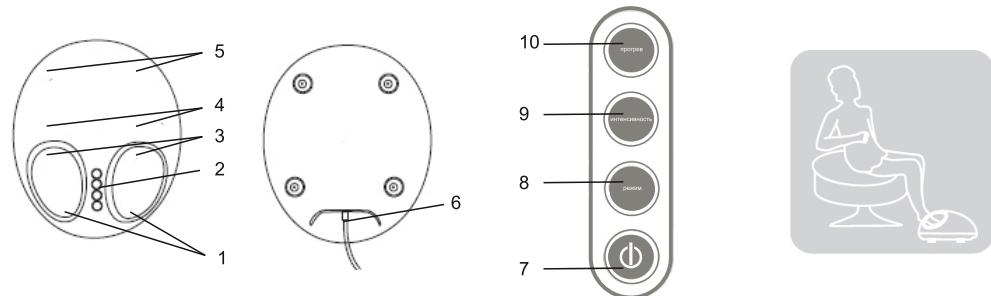

1. Подсоедините массажер к розетке электрической сети и включите его.
2. Поставьте массажер на пол перед Вашим стулом.
3. Для того чтобы включить массаж, один раз нажмите на кнопку включения/выключения прибора. Массажёр начнёт работу в режиме 1 (голубой цвет), со слабой интенсивностью (голубой цвет) с функцией прогрева (красный цвет)
4. Поставьте Ваши ступни на врачающиеся массажные головки, прилагая уровень давления, который, как Вы чувствуете, Вам удобен. Настоятельно рекомендуется, чтобы при использовании этого прибора ноги были в носках.
5. Для того чтобы отключить функцию прогрева при массаже, нажмите кнопку прогрева.

# Инструкция по эксплуатации.

## ПАНДА

Массажёр для ног  
AllRest CH-630



6. Для того чтобы сменить интенсивность воздействия, нажимайте на кнопку переключения интенсивности. 7. Для того чтобы сменить режим воздействия, нажимайте на кнопку переключения режимов.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

НЕ пытайтесь встать (стоять) на массажере для ступней ног. Используйте его только тогда, когда Вы сидите.

НЕ используйте функции массажа или прогрева непрерывно более 15 минут.

### Технические характеристики

Напряжение: 220 В / 50 Гц

Мощность: 50 Вт

Автоотключение: 15 минут

### Меры безопасности

После использования отключите прибор от розетки. Не используйте прибор если кабель или штекер повреждены или нагрелись. Не используйте прибор вблизи легковоспламеняющихся веществ.

Не беритесь за прибор мокрыми руками. Не кладите прибор в местах повышенной влажности и не погружайте в воду. Не давайте прибор детям. Не ремонтируйте и не разбирайте прибор самостоятельно.

### Рекомендации по уходу за изделием

Отсоедините прибор от розетки и дайте ему остыть перед очисткой. Очищайте прибор только мягкой, слегка влажной губкой. Не погружайте прибор в жидкость для очистки. Никогда не используйте для очистки абразивные очистители, щетки, средства для полировки мебели/стекла, разбавители для краски и т.п. Во избежание поломки НЕ оборачивайте провод вокруг прибора и НЕ вешайте его за провод.

### Гарантийное обслуживание

Гарантийный срок на массажер для ног ПАНДА CH-630 AllRest составляет 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения покупателем всех положений, излагаемых в инструкции.

## ПАНДА

Массажёр для ног  
AllRest CH-630



### Условия гарантии:

Наличие гарантийного талона, кассового или товарного чека, удостоверения личности.

Гарантийному ремонту подлежат только приборы в полной комплектации!

Гарантия не распространяется на недостатки (неисправности), вызванные следующими причинами:

1. Гарантийный талон утерян, неправильно заполнен или подделан.
2. Наличие на приборе внешних или внутренних механических повреждений (трещин, сколов, следов ударов и т.п.).
3. Повреждения вызваны не зависящими от продавца причинами: природные явления или пожар, перебои в подаче воды или электроэнергии, действие животных, насекомых, неправильной установкой и т.п.
4. Недостатки возникли вследствие нарушения покупателем правил использования, хранения или транспортировки прибора, установленных нормативной или технической документацией на него.
5. Производилось вскрытие или ремонт покупателем или другим не уполномоченным лицом, а также неправильный монтаж или подключение.
6. Гарантия не распространяется на вышедшие из строя вследствие нормального износа принадлежности, запчасти, расходные материалы.
7. Естественный износ прибора (полная выработка ресурса, сильное внешнее или внутреннее загрязнение и т.п.).
8. Прибор использовался не в быту, а в целях извлечения прибыли (комерческих целях), кроме случаев, когда эти цели предусмотрены нормативной и технической документацией на прибор