

MAXION





SEVEN LINER

SLIM / SLIM SET

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

Пневматический массажёр с функцией
дополнительного массажа рук и ног.

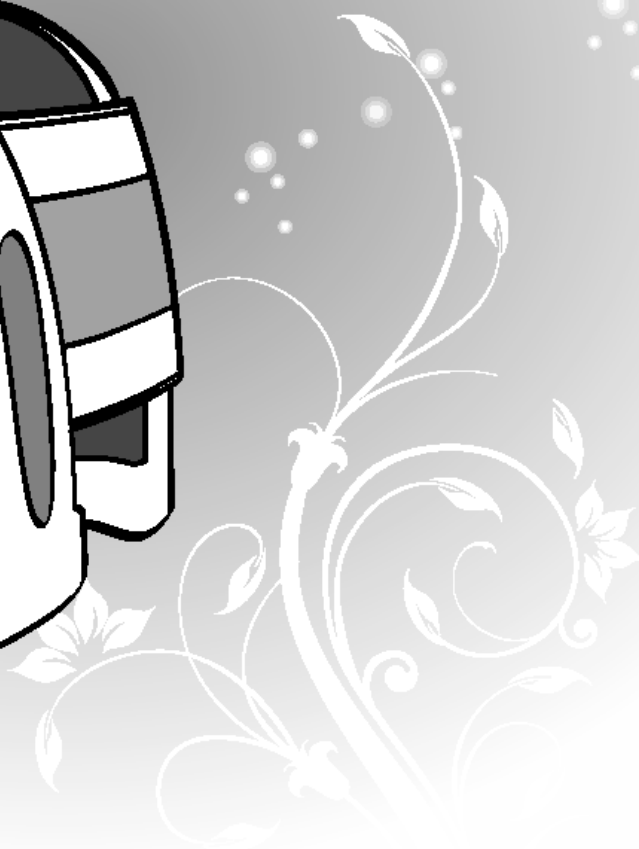

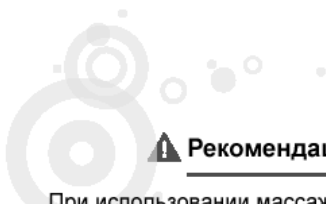

Рекомендации по безопасному использованию массажёра.

При использовании массажера проконсультируйтесь с врачом.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями по безопасному использованию массажером перед тем, как начать работу и следуйте инструкции.

Меры предосторожности, указанные ниже, приведены с тем, чтобы данный массажер использовался правильно и по назначению, и не нанес вреда пользователю или окружающим его людям. Поскольку все ниже перечисленное относится к безопасному использованию массажера, мы просим пользователей строго следовать всем рекомендациям данной инструкции.

Не использовать совместно с:

Любая разновидность имплантированных приспособлений;

Приборы электростимуляции, например стимулирующие деятельность сердца или легких;

Медицинские электрические устройства, такие как электрокардиограф.

При наличии у Вас признаков заболеваний, перечисленных ниже, пожалуйста, проконсультируйтесь с лечащим врачом перед использованием массажером.

Острые, хронические заболевания;

Злокачественные опухоли;

Инфекционные заболевания;

Слабое сердце;

Высокая температура (более 38°C);

Повышенное кровяное давление;

Головные боли, боли в желудке и заболевания кожи.

Острое воспаление в ногах, гнойное воспаление.

Перелом, вывих, растяжение мышц.

Кроме того, не рекомендуется использовать массажер при **менструации, беременности и чувствительной коже**. Рекомендуется одевать облегающую одежду

Меры предосторожности.

- Не пользуйтесь массажером непосредственно перед сном;
 - В случае возникновения каких-либо проблем со здоровьем, немедленно прекратите пользоваться массажером, проконсультируйтесь с врачом.
 - Не ходите в массажных «чулках», это может привести к их поломке;
 - Не оставляйте массажер в местах, доступных для детей, и не позволяйте пользоваться массажером людям, которые не в состоянии отвечать за свои поступки.
 - Не храните, не пользуйтесь массажером в местах с повышенной температурой, с повышенным содержанием влажности и пыли, во время принятия ванны или вождения машины;
 - Не подвергайте массажер резким переменам температуры и не встряхивайте его. Это может привести к деформации, изменению цвета и образованию трещин.
 - Не прокалывайте ремни или «чулки» острыми предметами.
 - Первый сеанс рекомендуется проводить в течение установленного времени. При отсутствии побочных эффектов можно установить таймер на более продолжительное время.
 - Не включайте подачу воздуха при открытой молнии или «липучки», это может привести к поломке, перед первичным использованием, проконсультируйтесь с врачом.
 - Массажер изготовлен с применением высокоточных электронных компонентов, не пытайтесь его разобрать;
 - Пользуйтесь только оригинальными комплектующими.
- * При прерывании процедуры массажа, дождитесь, пока воздух выйдет из всех массажных элементов.

Наименование частей и описание.

1. Основная часть.



① Разминающая секция
- Элемент, находящийся внутри секции движется вверх и вниз, плотно прилегая к икрам, формируя прекрасную линию ног.

② Массажная секция
- Функция массажа усилена дополнительной функцией прогрева.
*Цикл длится 15 минут и таймер прекращает работу, независимо от выбора функций.
Для продолжения работы снова включите массажёр.
*Вы можете выбрать желаемую функцию с помощью кнопок на панели управления.

③ Панель управления

Кнопка включения/авторежим – При включении массажёра начинает работать автоматический режим
Кнопка включения разминающего режима - Разминающий эффект достигается устройством, которое перемещается вдоль икр.

Кнопка включения массирующей секции - Массаж может проводиться одновременно с накачиванием накладок.

Кнопка включения пневмомассажа (Это касается Seven Liner Slim) - пневмомассаж с использованием воздушных накладок может регулироваться и использоваться в 3 этапа.

④ Окошко индикации

- Окошко индикации работает при подключении к сети.



2. Рекомендации по использованию.



③ Воздушные накладки

(1) предплечье



(2) бедро



Если соединить две накладки вместе, то их можно использовать для массажа живота.

3. Комплект поставки.

① Пакет




② Воздушные шланги



Seven Liner	Основная часть	Рук-во пользователя	Комплект поставки		
			Воздушная накладка		Воздушный шланг
			Предплечье	Бедро	
SLIM	1	1	нет	нет	нет
SLIM SET	1	1	2	2	1

Правила использования.

1. Основная часть.

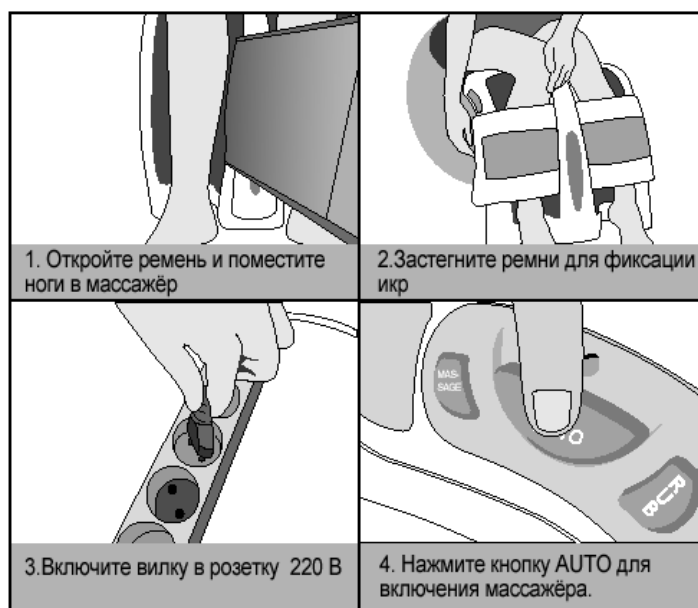

2. Режим массажа / Разминающий режим



Пневмомассаж (Seven Liner Slim Set)

(1) Предплечье


1. Присоедините вилку шланга к основной части и нажмите снова.	2. Присоедините шланги к отверстиям соответствующего цвета	3. наденьте накладку на руку и застегните молнию
		Для улучшения эффекта равномерного распределения воздуха сожмите пальцы в кулак

(2) Бедро

		Приложите массажёр к бёдрам (к коленям) Приложите массажёр к животу и поясу (груди) Надевайте воздушную накладку таким образом, чтобы стрелочка указывала на колено, если Вы надеваете воздушную накладку на бедра. Надевайте воздушную накладку таким образом, чтобы стрелочка указывала на грудь, если Вы надеваете воздушную накладку на низ живота (пояс).
1. Присоедините вилку шланга к основной части и нажмите снова	2. Оберните широкую секцию вокруг пояса	
3. Присоедините шланги к отверстиям соответствующего цвета	4. Нажмите кнопку пневмомассажёра	

Правила пользования.

(3) Живот, пояс.

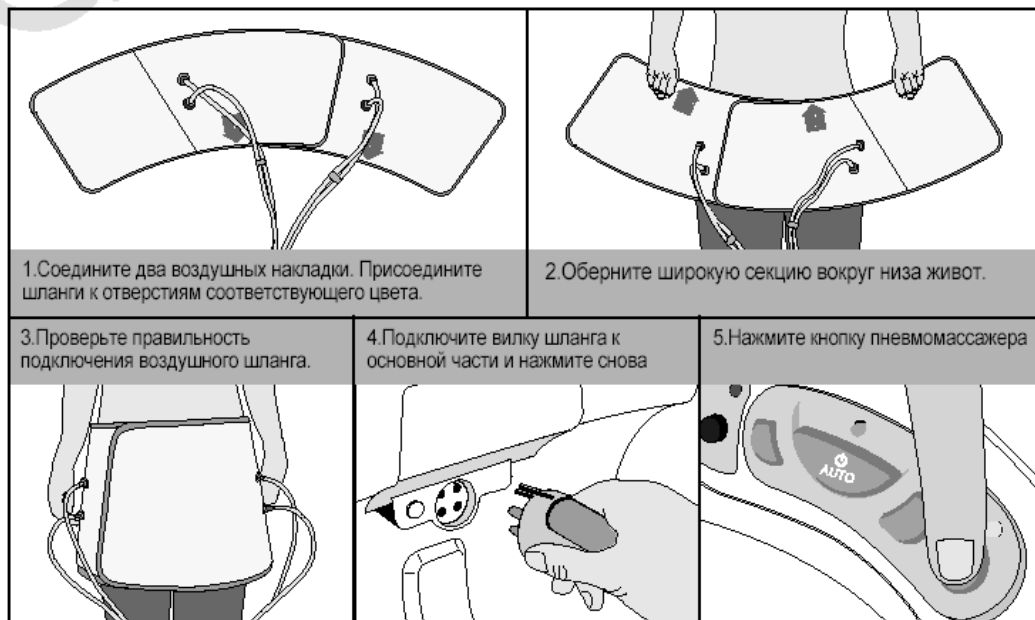

*Пневмомассаж может дополнительно применяться во время массажной, разминающей и автофункции.

*Если Вы хотите использовать только пневмомассаж не нажимайте кнопку авторежима.

*Если шланг не подключен правильно массажер не будет работать, т.к. установлен датчик.

Не допускайте изгибания или скручивания шланга.

*Перед использованием снимите такие предметы, как кольца, браслеты, часы. Не допускайте попадания острых предметов в воздушные накладки.

*Массаж осуществляется в трёх режимах – слабый, средний, сильный. Нажмите кнопку 1 раз для выполнения слабого режима, 2 раза для среднего, 3 раза для сильного и 4 раза для выключения (сильный режим сопровождается светодиодной подсветкой). Выполнение программы можно прекратить, если кнопка пневмомассажа удерживается более 3 секунд.

*Массажные накладки нельзя промывать водой, не стирайте их в стиральной машине.



1. Используйте массажер сидя в кресле



2. Используйте массажер находясь в комнате



3. Используйте массажер лежа



4. Используйте массажер для массажа рук

SEVEN LINER SLIM SET



5. Наденьте накладки одновременно на икры и бедра



6. Наденьте накладки одновременно на икры и предплечья



7. Наденьте накладки на низ живота



8. Внешний пневмомассаж может одновременно проводиться с массажем ног

Спецификации



Модель: SEVEN LINER SLIM / SEVEN LINER SLIM SET

Питание: 220 В

Потребление: 25 Вт

Размеры: 514 x 315 x 460 мм

Вес: 6.7 кг (SEVEN LINER SLIM) /
7.0 кг (SEVEN LINER SLIM SET)

Производитель: SEWON CNS CORP.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии		1(один) год с даты продажи
Дата продажи/Дата производства		
Покупатель	Назв.фирмы / Ф.И.О.	
	Адрес	
Продавец	Назв.фирмы / Магазин	
	Адрес	
	Менеджер-продавец	
Адрес сервисного центра		

Производитель оставляет за собой право на конструктивные изменения, не влияющие на качество прибора

ПРИМЕЧАНИЕ

В случае обнаружения в течение гарантийного периода заводских дефектов, Продавец обязан произвести замену неисправного товара на аналогичный новый, при условии наличия данной модели товара на складе или заменить на другую модель соответствующего качества и стоимости.

Гарантийные обязательства не выполняются в следующих случаях:

- механических повреждений, повреждений корпуса товара и неисправностей в работе, появившихся по вине и небрежности Покупателя (неправильное напряжение), а также повреждений, причиненных в связи с форс-мажорными обстоятельствами;
- самостоятельных попыток разборки и починки прибора.

Made in Korea