


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Массажер Eve
- Батарейки (4 x 1,5 В AAA)

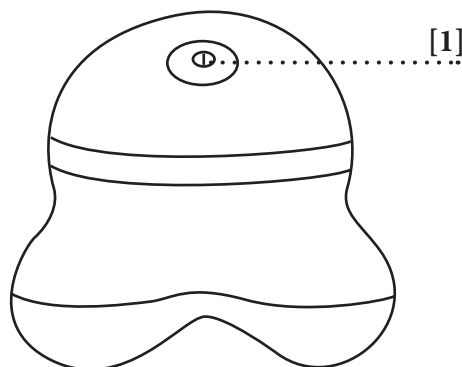

УПРАВЛЕНИЕ

[1] Вкл. / выкл.

- Используйте данную кнопку для включения Eve.
- Для завершения массажа необходимо еще раз нажать на данную кнопку
- Для выключения Eve еще раз нажмите на данную кнопку.

ОБОРУДОВАНИЕ / ФУНКЦИИ

Современный дизайн, приятный на ощупь материал и возможность применения в любом месте — это Eve — миниатюрный массажер с большим спектром действия!

Благодаря трем массажным головкам с подсветкой, создающим конкретно направленную вибрацию, обеспечивается точечный и приятный массаж. Данный массажер можно легко и безопасно использовать на отдельных частях тела — спине, шее, руках и ногах. Массаж стимулирует кровообращение, снимает напряжение и улучшает кровоток, восстанавливает физическое состояние и активирует энергию.

Благодаря своему размеру и эргономичной форме Eve поместится в любой сумочке, а, следовательно, он всегда под рукой и может использоваться для массажа, например, в офисе, в самолете или в пути.

ПОЗДРАВЛЯЕМ


Купив данный массажер, Вы подтвердили, что заботитесь о своем здоровье.

Просим Вас внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации. Выполнение и соблюдение рекомендаций, указанных в Инструкции, позволит Вам пользоваться массажером в течение длительного времени.

Желаем Вам провести много приятных минут с Вашим личным Eve.

НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Поверните крышку как показано ниже - против часовой стрелки и вставьте батарейки. Закройте крышку

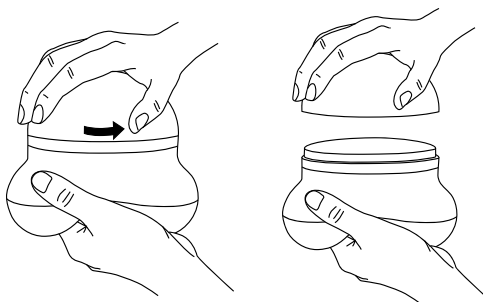

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

Соответствует директиве 2006/95/ЕС

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Устранение
Аппарат не включается	Проверьте, правильно ли вставлены батарейки. Поменяйте батарейки.
Массаж «слабый»	Поменяйте батарейки.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Массажер не требует специального обслуживания. В случае возможных неполадок ремонт может производиться только уполномоченными специалистами. Нецелевое применение аппарата и неавторизованный ремонт запрещены из соображений безопасности и приведут к утрате гарантий.

Чтобы не превышать уровень воздействия на мышечную и нервную системы, не нарушайте рекомендованное время массажа в 15 минут.

Любой массаж, даже мануальный противопоказан в случае беременности или, если области массажа (одна или несколько) подвержены любому из перечисленных заболеваний: недавние травмы, тромбозы, воспаления и опухоли любого происхождения, а также рак. Для использования аппарата в лечебных целях рекомендуется консультация с врачом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: 96 x 96 x 90 см
Масса: 170 г
Номинальное напряжение: 1,8 Вт батарейки.
Батарейки: 3 x 1,5 В AAA
Защита от разбрызгиваемой воды согласно IPX5
Сертификаты:



Генеральный импортер в России:

ООО «Альфа БС»
109518, Москва,
ул. Грайвороновская, д.4 стр.1

тел: (495) 229-45-32
факс: (495) 229-45-33

Эл. адрес: info@casada.ru
Адрес в интернете: www.casada.ru

Авторское право на изображение и тексты принадлежит «Casada International GmbH» они не могут быть использованы иначе, нежели с явного согласия владельца.

Авторское право © 2012 г.
Casada International GmbH

Все права защищены.