


КОМПЛЕКТАЦИЯ

[1] - Mini



ВИБРАЦИЯ

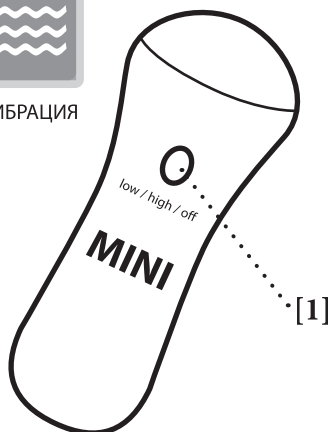

УПРАВЛЕНИЕ

[1] - Low/High/Off

Нажатием данной кнопки, массажер начинает работать в режиме вибрации, при повторном нажатии интенсивность вибрации увеличивается. После нажатия кнопки в третий раз, массажер выключается.

МАССАЖ

Каждый знает о благотворном расслаблении напряженных мышц, достигаемом с помощью массажа. Процессы, имеющие место внутри мышц, кровеносных сосудов и нервных стволов объясняются просто.

В организме существуют две транспортные системы. Система кровообращения, перекачивающая кровь от сердца, обеспечивает мозг, органы и мускулатуру питательными веществами и жизненно важным кислородом, а лимфатическая система заботится о том, чтобы продукты обмена, шлаки и токсины были выведены из организма.

Если иммунная система подвергается воздействию инфекций и вирусов, врач в первую очередь прощупывает лимфатические узлы, так как если они увеличены, это означает что они производят защитные клетки для борьбы с инфекцией.

ХРАНЕНИЕ / УХОД

1. Рекомендуется хранить в сухом, защищенном от пыли месте с размотанным кабелем.
2. Не хранить рядом с системами отопления и открытым огнем. Не подвергать непосредственному воздействию солнечных лучей.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации аппарата для массажа внимательно прочтите следующие правила, чтобы достичь безупречного функционирования прибора и его оптимального воздействия. Просьба сохранять Правила в течении всего времени эксплуатации.

Массажный аппарат соответствует общепринятым техническим принципам и современным требованиям к безопасности.

Избегайте попадания на аппарат воды, не подвергайте воздействию высоких температур и прямых солнечных лучей.

Если Вы используете электронные приборы, например, сердечный стимулятор, каждый раз перед массажем Вам необходимо проконсультироваться с врачом.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

Соответствует директиве 2006/95/EC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер: 5x4x15,5 см

Питание: 2 AA 1,5В

Вес: 130 г

Сертификаты:



Генеральный импортер в России:

ООО «Альфа БС»
109518, Москва,
ул. Грайвороновская, д.4 стр.1

тел: (495) 229-45-32
факс: (495) 229-45-33

Эл. адрес: info@casada.ru
Адрес в интернете: www.casada.ru

Авторское право на изображение и тексты принадлежит «Casada International GmbH», они не могут быть использованы иначе, нежели с явного согласия владельца.

Авторское право © 2012 г.
Casada International GmbH

Все права защищены.

