


MAXIWELL III

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РУССКИЙ

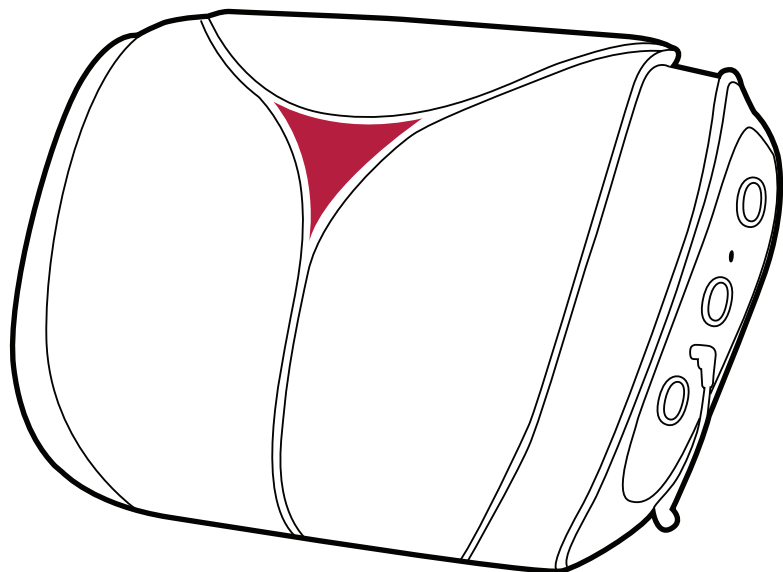

ВИБРАЦИЯ



ПРОГРЕВ



РАЗМИНАЮЩИЙ
МАССАЖ
(ШИАТЦУ)

ФУНКЦИИ

ШИАТЦУ

Шиатцу (надавливание пальцев) представляет собой вид терапии, изобретенный в Японии. Техника массажа состоит из легких надавливаний на строго определенные активные точки. Массаж Шиатцу, повышает общие защитные силы организма человека, благодаря чему повышается сопротивляемость заболеваниям.


ВИБРАМАССАЖ

Вибромассаж заставляет равномерно вибрировать целые участки тела с глубоким проникновением. Массаж стимулирует циркуляцию, согревает и расслабляет мышцы.

ПРОГРЕВ

В новой модели Maxiwell III стандартные пластиковые массажные головки заменены на головки из натурального нефрита. Природные силы нефрита усиливаются с помощью интегрированной системы прогрева. Действие массажа усиливается за счет передачи целительного тепла вглубь мускулатуры. Камень нагревается медленно, лишь через несколько минут Вы почувствуете тепло. В этой фазе нагревания вращающиеся движения массажных головок расслабляют ткани и устраняют поверхностные уплотнения и напряжения.

Для Вашей собственной безопасности механизмы оборудованы защитой от перегрева. Тепло генерируется в электромоторах в условиях большой нагрузки и избыточного давления. До того, как это приведет к возникновению любого риска, произойдет автоматическое отключение механизмов, повторное включение будет возможным только спустя 30 или 50 минут простоя.

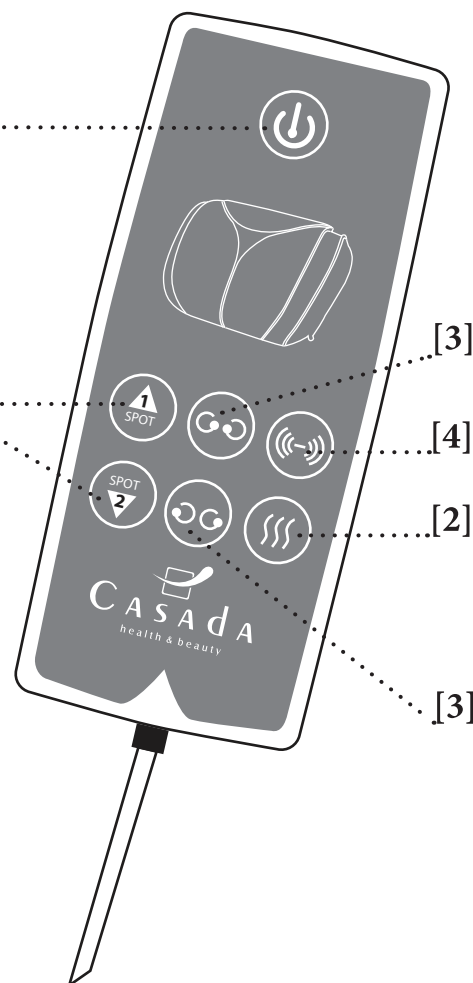

УПРАВЛЕНИЕ

[1] Включение / Выключение

При нажатии кнопки POWER (Питание), массажер Maxiwell III приходит в режим готовности и начинает обратный отсчет 15 минутного периода. При повторном нажатии кнопки или по истечении 15 минут Maxiwell III прекращает работу.

[2] Прогрев.

Включение / выключение функции прогрева.

[3] Массажные головки.

Изменение направления вращения массажных головок.

[4] Вибрация.

Включение / выключение функции вибрации

[5] Скорость.

Выбор скорости вращения массажных головок.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Maxiwell III
- Сетевой адаптер
- Пульт управления
- Автомобильный адаптер 12V

НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала эксплуатации проверьте, соответствует ли сетевое напряжение напряжению, указанному на штепсельной вилке. Если да, то вставьте штепсельную вилку в розетку.

С помощью автомобильного адаптера Вы также можете использовать Maxiwell III во время путешествий (не во время поездки на автомобиле). Просто вставьте автомобильный адаптер в прикуриватель.

Расположите Maxiwell III на устойчивом стуле. Вес Вашего тела усиливает эффект массажа. Следите за тем, чтобы все Ваше тело располагалось по центру, так чтобы массажные головки вращались параллельно к позвоночнику

MAXIWELL III

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РУССКИЙ

ХРАНЕНИЕ / УХОД

Регулярный уход продлит срок службы Вашего массажера Maxiwell III и будет гарантией безопасной эксплуатации на всем протяжении использования.

1. Рекомендованные условия хранения: сухое место, без пыли.

2. Избегайте попадания жидкостей на Maxiwell III и воздействия открытого огня.

3. Очищайте массажер, используя сухую мягкую ткань.

4. Когда массажер Maxiwell III не используется, всегда отключайте его от источника питания.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Устранение
Массажер не работает, хотя он подключен к источнику питания.	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте соединение адаптера.• Возможен перегрев массажера после длительного использования. Он автоматически охлаждается до своего нормального состояния. Отключите питание и позвольте массажеру остыть в течение 30 – 50 минут.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

Соответствует директиве 2006/95/EC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: 45,5 x 32,5 x 12,5 см

Вес: 3,5 кг.

Номинальная мощность: 30 Ватт

Напряжение:

Вход: переменный ток 100 -240 В ~ 50/60 Гц

Выход: постоянный ток 12 В, 2500 мА

Во время работы в автоматическом режиме: 30 Вт

Сертификаты:



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения надлежащего функционирования и оптимального эффекта просим Вас внимательно прочитать следующие инструкции перед применением данного оздоровительного оборудования. Просим Вас сохранить данную инструкцию для последующего использования!

• Данный массажер соответствует общепризнанным принципам технологии и действующим нормативам техники безопасности.

• Данное оборудование не требует технического обслуживания. Любой необходимый ремонт может быть выполнен авторизованным специалистом. Неправильное использование и несанкционированный ремонт запрещены по причинам безопасности и ведут к аннулированию гарантийных обязательств.

• Не касайтесь штепсельной вилки мокрыми руками.

• Избегайте контакта оборудования с водой, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.

• В случае неиспользования массажера в течение длительного периода убедитесь в его отключении от сети питания для предотвращения риска короткого замыкания.

• Не используйте поврежденные штепсельные вилки, шнуры питания или плохо закрепленные розетки. Поврежденные вилки или шнуры питания должны быть заменены производителем, представителем сервисной организации или квалифицированным персоналом. При неисправности немедленно отключите оборудование от сети питания. Мы не несем ответственности за повреждения по причине неправильного или ненадлежащего использования.

• Во избежание чрезмерной нагрузки на мышцы и нервные волокна не следует превышать рекомендованную продолжительность сеанса массажа в 30 минут.

• Не используйте заостренных или острых предметов.

• Любого массажа – в том числе и ручного – следует избегать во время беременности и/или при наличии одного или более противопоказаний в области массажа: головная боль, недавние травмы, тромботические заболевания, воспаления и опухоли любого типа, включая раковые. Рекомендуется посоветоваться со своим врачом перед лечением любых повреждений или заболеваний.

• Не используйте массажер во время управления автомобилем.

• Если Вы используете электрические аппараты, например, кардиостимулятор, то перед любым видом применения массажера Вам следует проконсультироваться со своим врачом.

Производитель:

Casada GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderbon, Germany
Tel.: (+49) 52 54 9 30 98 0
www.casada.de
info@casada.de

Генеральный импортер в России:

ООО «Альфа БС»
109518, Москва,
ул. Грайвороновская, д.4 стр.1
тел: (495) 229-45-32
факс: (495) 229-45-33
Эл. адрес: info@casada.ru
Адрес в интернете: www.casada.ru

Авторское право на изображение и тексты принадлежит «Casada International GmbH» они не могут быть использованы иначе, нежели с явного согласия владельца.

Авторское право © 2012 г.
Casada International GmbH
Все права защищены.

