


Руководство по эксплуатации

Компания «Технологии здоровья» благодарит вас за покупку гидромассажной ванны. Мы стараемся предоставить вам только лучшие приборы для вашего здоровья. Данный массажер для ног разработан японскими инженерами, что без сомнения делает его очень выгодным приобретением.

Гидромассажная ванна для ног предназначена для проведения сеанса массажа посредством игольчатых массажных точек на дне прибора, пузырькового релаксационного массажа, глубокого воздействия массажными роликами на стопы ног и прогрева тканей мышц и суставов инфракрасным излучением. А 16 встроенных в дно магнитов создают магнитное поле, способствующее восстановлению после травм и лучшему снятию усталости и боли в ногах.

Комплектация

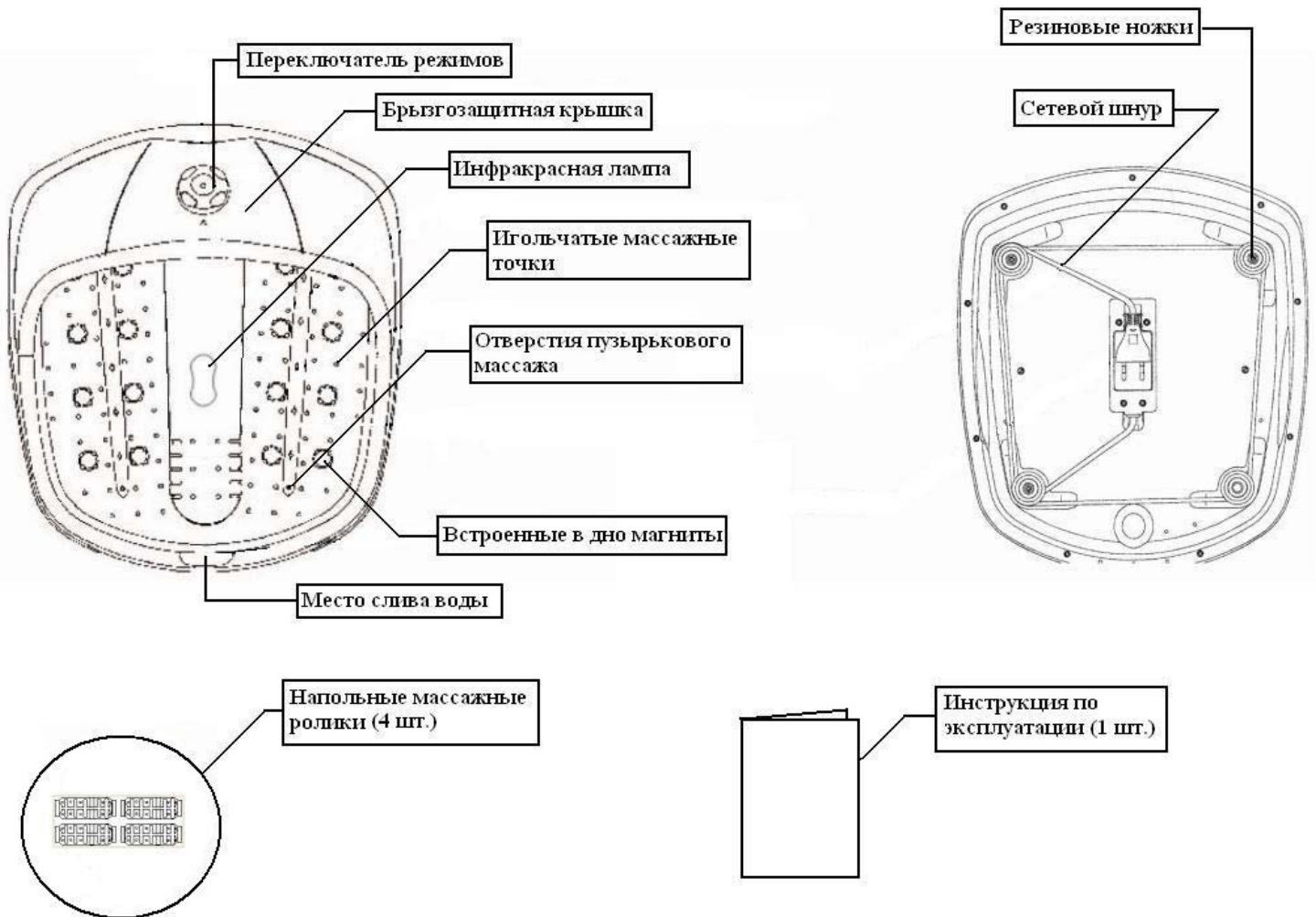

Правила безопасного использования

- Прежде чем начать пользоваться прибором внимательно ознакомьтесь с правилами безопасного использования.
- Сохраняйте данную инструкцию по эксплуатации с гарантийным талоном в течении всего срока пользования прибором.
- Прибор предназначен только для домашнего использования.
- Не позволяйте детям использовать гидромассажную ванну без взрослых.
- Во избежании поломки прибора заполняйте ванну только водой.
- В массажной ванне нельзя стоять! Перед тем как поставить ноги в ванну, необходимо сесть. Перед тем как встать — выньте ноги из ванны.
- Нельзя использовать прибор при поврежденном шнуре питания или других частях.
- Не помещайте прибор целиком в воду! Не храните гидромассажную ванну вблизи источников тепла, в условиях повышенной влажности или под прямым солнечным светом.
- Отключайте гидромассажную ванну от сети перед тем как слить, залить воду и если вы ей не пользуетесь.

- Отключая прибор держитесь за вилку, а не за шнур. Не в коем случае не отключайте прибор влажными руками.

Использование массажера

1. Закрепите массажные ролики на дне прибора.
2. Заполните гидромассажную ванну водой, необходимой вам температуры, до отметки MAX, при отсутствии ног в ванне. (под инфракрасной лампой).
3. Установите массажер на полу перед собой. (Перед креслом, диваном, стулом и т.д.)



В массажной ванне нельзя стоять!

4. Подключите прибор к сети.

Ноги в момент подключения, отключения прибора в сеть не должны находиться в воде!

5. Сядьте и опустите ноги в воду.
6. Выберите необходимый режим массажа при помощи переключателя.

Сеанс массажа не должен превышать 15 минут!

7. По окончании сеанса массажа установите переключатель в режим «OFF».
8. Отключите прибор от сети, вылейте воду, дайте прибору остыть и высохнуть.

Режимы работы массажера

На выбранный вами режим указывает треугольная стрелка.



Режим «OFF» - прибор выключен



Режим «B» - пузырьковый массаж

**Режим «B+M+IR» -
прогрев**



пузырьковый массаж, вибромассаж, инфракрасный



Режим «M+IR» - вибромассаж, инфракрасный прогрев

Внимание!

- 1. Перед использованием прибора проконсультируйтесь с врачом. Людям, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, кожными заболеваниями, а так же беременным женщинам нужно быть особенно аккуратными.
- 2. Перед повторным использованием прибора необходимо дать ему остыть.
- 3. Если использование гидромассажной ванны доставляет вам дискомфорт — обратитесь к врачу.
- 4. Не используйте инфракрасную лампу, если у вас чувствительная кожа или заболевания кожи ног.
- 5. Перед тем как вставить вилку прибора в розетку или вынуть вилку из розетки, убедитесь, что переключатель режимов стоит на отметке «OFF».
- 6. Не ипользуйте прибор во время сна или если вы хотите спать.
- 7. Данный прибор не предназначен для использования детьми или лицами, чьи физические, сенсорные или умственные возможности препятствуют его безопасному использованию, если они не находятся под наблюдением. Необходимо следить за детьми для того чтобы убедиться, что они не используют его в качестве игрушки.

Воздействие прибора

При правильном использовании массажера заметно повышается циркуляция крови в ногах, что проявляется в появлении приятного и продолжительного ощущения теплоты.

Около 400 игольчатых массажных точек на дне прибора мягко воздействуют на ваши стопы, максимально эффективно массируя и укрепляя их. Вы легко можете контролировать эффективность процесса простым и легким нажатием ног на дно ванны. Наличие 70 струй воздуха в ванночке обеспечивает образование теплых пузырьков, помогающих вашим ногам расслабиться.

Массажные ролики помогут произвести более глубокий массаж, что поможет устранить тяжесть в ногах.

Инфракрасное излучение глубоко проникает в тело человека, передает тепло и прогревает ткани, мышцы и суставы, а так же ускоряет циркуляцию крови и способствует проведению более эффективного массажа ступней ног.

Гидромассажная ванна имеет 16 встроенных в дно магнитов. Создаваемое магнитное поле способствует восстановлению после травм, а так же полезно при часто возникающих судорогах и болях в ногах.

Гарантийный талон

Наименование изделия	
Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Номер чека/накладной	
Подпись продавца	

Условия гарантии

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течении 1 года со дня продажи изделия и включает в себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. В случае невыполнения гарантийных обязательств в течении 14 дней со дня сдачи товара в гарантийную мастерскую, или в случае 3-кратного гарантийного ремонта изделия и следующей поломки в течении гарантийного срока не по вине покупателя, покупатель имеет право на замену товара новым того же типа или на возврат денег.

Печать продавца

С правилами и условиями эффективного и безопасного использования товара, а так же с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен. Комплектность и исправность прибора проверены в присутствии покупателя.

ФИО и подпись покупателя

Адреса сервисных центров:

г. Екатеринбург
ИП федоров А.А.
тел. +7 (343) 375-88-20

г. Москва
ООО «Технологии здоровья»
тел. +7 (495) 792-51-50
+7 926 452-63-53