




Электростимулятор WELSS WS 7010

Продукция компании
WELSS – Ваш собственный
косметологический салон!

Спасибо за выбор
данного продукта!

WS 7010

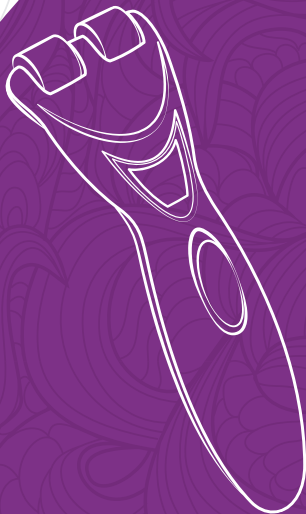



Оглавление

Введение	3
Важная информация.....	4
Устройство.....	4
Использование устройства	5
Схемы массажа.....	6
Ожидаемые результаты	6
Устранение неисправностей.....	7
Противопоказания.....	7
Технические характеристики.....	8

Введение

Электромиостимуляция – это воздействие слабых электрических импульсов как на поверхностные, так и на глубокие ткани лица и тела. Данная процедура эффективный и необходимый этап косметического комплекса для профилактики возрастных изменений при всех типах кожи.

Процесс электромиостимуляции проводится с помощью специального генератора электрических сигналов и электродов, накладываемых на мышцы.

Длительность процедуры не должна превышать 15–20 мин. Курс состоит из 20–25 процедур.

Для поддержания результатов после курса электромиостимуляции необходимо повторять процедуру раз в неделю.

В отличие от мышц тела, мимические мышцы зачастую находятся в состоянии «расслабленности». К сожалению, эта «расслабленность» приводит к более быстрой их атрофии и в целом – к раннему старению. Предотвратить эти неприятные процессы может **электромиолифтинг** – метод электрической стимуляции мышц лица, шеи и области декольте. Этот метод уже зарекомендовал себя как максимально эффективный и безопасный.


Кроме того, процедура электромиостимуляции сопровождается улучшением микроциркуляции, лимфодренажным эффектом, снабжением тканей кислородом и необходимыми питательными веществами.

❗ Важная информация

- Перед использованием устройства проконсультируйтесь с врачом.
- Не разбирайте устройство самостоятельно. При необходимости ремонта обратитесь в сервисный центр.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Запрещено использование устройства в непосредственной близости от воды.
- Храните устройство в сухом месте.
- Неаккуратное использование может привести к поломке устройства.
- Не забудьте выключить устройство после использования.
- Устройство предназначено исключительно для личного использования.

Устройство

1. **Titanium roller** – титановый ролик.
2. **LCD Display** – LCD-дисплей.
3. **Level Adjust Button** – кнопка выбора уровней.
4. **Mode Adjust Button** – кнопка выбора режима (быстрое нажатие).
5. **Power on/off** – кнопка питания (долгое нажатие).
6. **Battery Case** – отсек для батарей.

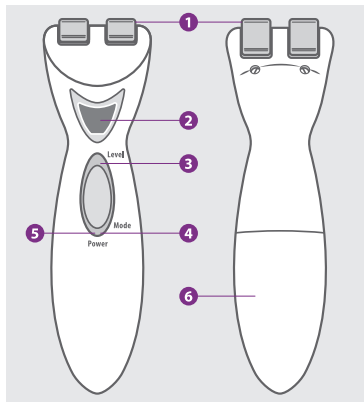

Использование устройства

1. Убедитесь, что элементы питания устройства вставлены правильно.
2. При нажатии и удержании кнопки **Power** загорается дисплей.
3. Нажмите кнопку **Mode** для выбора необходимого режима: **Массаж/Электромиостимуляция/Время**.
4. Нажмите кнопку **Level** для того, чтобы выбрать необходимый уровень работы массажера: **Массаж** (непрерывный или импульсный), **ЭМС** (1–4 уровня), **Время** (1–15 минут).
5. Можно сочетать режимы **Массаж** и **ЭМС**.

Прикоснитесь электромиостимулятором к области лица или шеи, где предполагается проведение процедуры и удерживайте устройство в одном положении 60 секунд.

❗ ВАЖНО! Избегайте воздействия электромиостимулятора в области щитовидной железы.



Схемы массажа

Шаг 1. Область щёк.

Шаг 2. Область вокруг глаз.

Шаг 3. Область лба.

Шаг 4. Нижняя часть подбородка.

Шаг 5. Левая нижняя часть подбородка

Шаг 6. Правая нижняя часть подбородка.

Ожидаемые результаты

Покраснение и незначительные отёки кожи – естественный результат косметических процедур. Такая реакция кожи означает, что Вы достигли желаемого эффекта. Через 15 минут после процедуры покраснение и отёки сходят, остается только нежный здоровой румянец.

После процедуры разглаживаются морщины, заметно улучшается текстура и эластичность кожи. Клинические исследования показали, что через три недели после использования **Электромиостимулятора WELSS** даже глубокие возрастные морщины сокращаются на 16%.

Устранение неисправностей

■ Устройство не включается

- Убедитесь, что элементы питания устройства вставлены правильно.
- Проверьте достаточно ли заряда в батареях для работы устройства.
- Необходимо несколько секунд удерживать кнопку **Power** для активации устройства.

■ Не работает дисплей

- Проверьте достаточно ли заряда в батареях для работы устройства.
- Необходимо несколько секунд удерживать кнопку **Power** для активации устройства.

■ Не ощущается прохождение тока при электромиостимуляции

- Проверьте правильно ли установлен уровень мощности.

- Нанесите на кожу косметическое средство.

Противопоказания

- Беременность и период лактации.
- Онкологические заболевания.
- Использование электрокардиостимулятора.
- Послеоперационная реабилитация.
- Тромбофлебит.
- Сахарный диабет.
- Дерматологические заболевания.
- Шрамы, ссадины, ожоги.
- Родинки, родимые пятна.
- Гиперчувствительность кожи.



Технические характеристики

Питание: 2 батареи AM4/AAA/LR03

Частота вибраций: 12 000 колебаний в минуту

Размер устройства: 165 x 48 x 25 мм

Вес устройства: 86 гр.

Материалы:

- роллер титан, нержавеющая сталь
- корпус АБС+акрил

Режимы работы устройства: непрерывный/импульсный

Завод-изготовитель: Shenzhen Perfect Idea Tech. CO., Ltd., China/
Перфект Идея, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Дэливер», Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 3.

Гарантийный срок: 12 месяцев со дня покупки.

Телефон сервисного центра: +7 (495) 617-60-33

www.welss.ru

