




Система для очищения кожи BioSkin WELSS WS 7027

Продукция компании
WELSS – Ваш собственный
косметологический салон!

Благодарим за выбор
данного продукта!

WS 7027

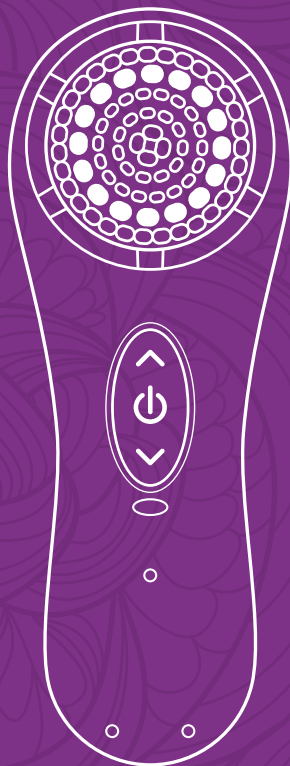



Оглавление

Введение	3
Важная информация	3
Устройство	4
Инструкция по применению	4
Режим работы устройства	5
Зарядное устройство	6
Уход за прибором	7
Противопоказания	7
Технические характеристики	8
Комплектация	8

Введение

Система для очищения кожи BioSkin WELSS WS 7027 применяется для ежедневного ухода за кожей. Благодаря данному устройству удаляются загрязнения в порах, счищается ороговевший клеточный слой, стимулируется обновление эпидермиса, а также увеличивается эффективность косметических средств, которые используются при процедуре.

Важная информация


- Перед использованием устройства проконсультируйтесь с врачом.
- Устройство предназначено исключительно для личного использования.
- Не разбирайте устройство самостоятельно. При необходимости ремонта обратитесь в сервисный центр.
- Запрещено использование устройства в непосредственной близости с водой.
- Если зарядное устройство или штекер упали в воду, немедленно прекратите использование устройства.
- Неаккуратное использование может привести к поломке устройства.
- Используйте только те аксессуары, которые входят в комплект к устройству и рекомендованы производителем.
- Необходимо хранить шнур питания вдали от источника тепла.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.

Внимание!

Зарядное устройство и адаптер питания не подлежат ремонту. При поломке данные аксессуары необходимо заменить.

Устройство

1. **Brush head** – Насадка «Щётка».
2. **Accelerator button** – Кнопка ускорения.
3. **Power button** – Кнопка включения устройства.
4. **Retard button** – Кнопка замедления.
5. **Speed/Charging indicator** Индикатор скорости/зарядки.
6. **Inductive charger** – Индуктивное зарядное устройство.
7. **Inductive charging receiving location** – Ёмкость для зарядного устройства.

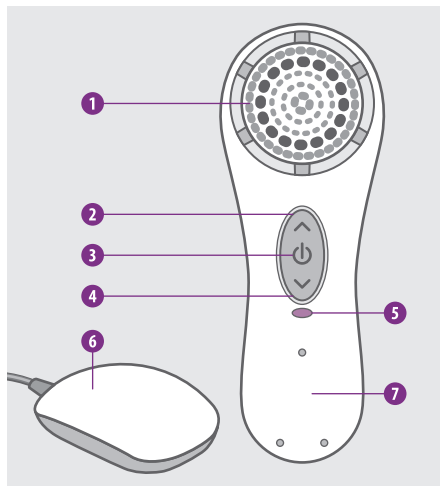

Инструкция по применению


- Перед первым применением устройства заряжайте батарею в течение 10 часов.
- Удалите макияж, умойтесь тёплой водой.
- Перед процедурой кожа лица должна оставаться увлажнённой.
- Опустите щётку в ёмкость с водой комнатной температуры.
- Избавьтесь от излишков воды, встряхнув щётку.
- Выберите необходимый режим работы устройства.
- После нажатия кнопки включения устройства, установите необходимую для процедуры скорость.
- Аккуратно, круговыми движениями водите щёткой по той области лица, где предполагается очищение.
- Во избежание поломок устройства, запрещается сильно нажимать на щётку-насадку.
- По окончании процедуры выключите устройство, удерживая его кнопку включения.

- Умойтесь тёплой водой. Тщательно промойте щётку-насадку.
- Нанесите средство по уходу за кожей.

■ Как правильно настроить скорость?

Система ультразвуковой очистки кожи **WELSS WS 7027** оснащена 3 режимами скорости: **высокая, средняя, низкая**. Нажмите на кнопку ускорения и замедления для выбора желаемой скорости. Текущая скорость с помощью подсветки отображается на панели инструментов справа.

Скорость	Индикатор
Высокая	Кнопка подсвечена сверху
Средняя	Кнопка подсвечена в центре
Низкая	Кнопка подсвечена снизу

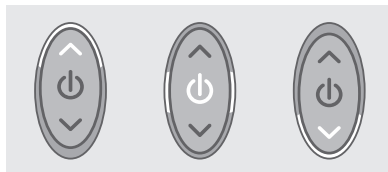

Режим работы устройства

Устройство оснащено 3 временными режимами:

- **Режим А** (1 минута): очищение области лба – 20 секунд, области носа/подбородка – 20 секунд, область щёк – по 10 секунд на каждую. По истечении одной минуты прибор выключается.
- **Режим В** (2 минуты): очищение области лба – 40 секунд, области носа/подбородка – 40 секунд, область щёк – по 20 секунд. По истечении двух минут прибор выключается.
- **Режим С** (30 минут): время процедуры не ограничено.

Устройство по умолчанию запрограммировано на режим А.

Режимы А–С: Нажмите и удерживайте кнопку ускорения, пока не услышите характерный сигнал переключения режимов. Таймер переключится на режим В. Снова нажмите и удерживайте кнопку ускорения, после сигнала таймер переключится на режим С.

Режимы С–А: Нажмите и удерживайте кнопку замедления, пока не услышите характерный сигнал переключения режимов. Таймер переключится на режим В. Снова нажмите и удерживайте кнопку замедления, после сигнала таймер переключится на режим А.


Зарядное устройство

Устройство поддерживает индуктивную зарядку и содержит индуктивное зарядное устройство. Когда прибор заряжается, разместите индуктивное зарядное устройство под световым индикатором (магнитное притяжение поможет Вам правильно расположить его). Белая подсветка кнопки включения питания указывает на то, что устройство заряжается. Полный цикл зарядки занимает 10 часов. Устройством можно использовать спустя 110–125 минут после того, как оно полностью зарядилось.

Индикатор зарядки	
Статус	Индикатор
Устройство подключено к зарядному устройству	Основной корпус вибрирует
Устройство заряжается	Индикатор мигает
Зарядка завершена	Индикатор становится белым



Если устройство полностью разрядилось и не работает, заряжайте аккумулятор **не менее 10 часов**. В случае, если проблема не устранена, обратитесь в сервисный центр.

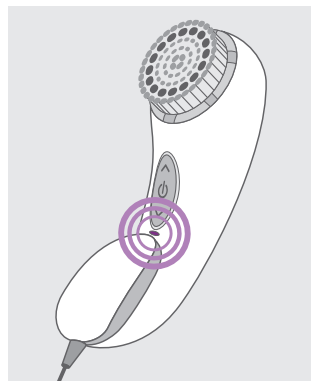

Индикатор зарядки аккумулятора		
Цвет индикатора	Уровень заряда аккумулятора	Оставшееся время зарядки, мин
Белый	Высокий	Около 125 минут
Жёлтый	Средний	6–8 минут
Красный	Низкий	Менее минуты
Мигающий красный	Почти разряжен	Нет (автоматическая защита)
Свет полностью погас	Разряжен	Нет

ВАЖНО!

- Не включайте прибор, если аккумулятор полностью разряжен. Это может привести к замыканию или поломке устройства.
- Если устройство не используется на протяжении длительного времени, аккумулятор может разрядиться.
- Не рекомендуется использование устройства, если индикатор зарядки мигает красным. Зарядите аккумулятор.

Уход за прибором

- Для очищения устройства не рекомендуется использовать любое абразивное или химическое моющее средство.
- Устройство, включая щётку, очищается тёплой мыльной водой.
- После каждого использования протирайте поверхность устройства влажной мягкой тканью.
- Устройство должно быть абсолютно сухим перед зарядкой.
- Если устройство используется редко, на забывайте заряжать аккумулятор каждые 3 месяца.
- Рекомендуется каждые 90–120 дней менять щётку-насадку.

Как снять щётку-насадку?

Нажмите на щётку и поверните её против часовой стрелки.

Как заменить щётку-насадку?

Вставьте щётку-насадку в устройство, надавите на неё и поверните по часовой стрелке.

Противопоказания

- Беременность и период лактации
- Онкологические заболевания
- Дерматологические заболевания
- Шрамы, ссадины, ожоги
- Родинки, родимые пятна
- Гиперчувствительность кожи



Технические характеристики

Напряжение сети:..... 100–240 В, 50/60 Гц, 0,8 А
Напряжение на выходе:..... 5 В, 1 А
Размеры корпуса:.....180х68х68 мм
Вес корпуса:.....198 гр.

Комплектация:

Устройство..... 1 шт.
Индуктивное зарядное устройство 1 шт.
Насадка-щётка для лица (с защитной крышкой) 1 шт.
Насадка-щётка для тела (с защитной крышкой) 1 шт.
Инструкция по применению 1 шт.

Завод-изготовитель: Shenzhen Perfect Idea Tech. CO., Ltd., China/
Перфект Идея, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Дэливер», Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 3.

Гарантийный срок: 12 месяцев со дня покупки.

Телефон сервисного центра: +7 (495) 617-60-33

www.welss.ru

