

GÉZATONE

ТРЕНАЖЕР

для подтяжки шеи
и овала лица

NECK LIFTING

Модель AMG617



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

**NECK
LIFTING**
Модель AMG617

ТРЕНАЖЕР
для подтяжки шеи
и овала лица

Второй подбородок с точки зрения анатомии — это избыточное скопление мягких тканей (кожа и жир) в области подбородка.

Причины появления второго подбородка:

- Генетическая предрасположенность
- Анатомическое строение лица
- Возрастные изменения
- Колебания веса, лишний вес
- Неправильный образ жизни

Теперь, когда вы знаете причины появления второго подбородка, настало время действовать. Методов борьбы со вторым подбородком есть несколько: хирургические, липолитическая мезотерапия, аппаратные процедуры, массаж и гимнастика для второго подбородка, а также коррекция питания и образа жизни.

Мы предлагаем самый простой и доступный способ устранения второго подбородка: ТРЕНАЖЕР для подтяжки шеи и овала лица NECK LIFTING Модель AMG 617



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

**NECK
LIFTING**
Модель AMG617

ТРЕНАЖЕР
для подтяжки шеи
и овала лица

Выраженные признаки старения в области шеи становятся заметны по нескольким причинам. Прежде всего, главная роль принадлежит большому количеству движений шеи и незащищенности кожи этой области от влияния внешних факторов, стимулирующих процессы увядания. Прибавьте к этому лишние жировые отложения и застой жидкости и вот уже появился второй подбородок.

С возрастом влияние гравитации на наше тело усиливается, что сказывается на состоянии кожи и снижении её эластичности. Особенно актуальной проблема гравитационного птоза становится после 45 лет. Гравитация сильно влияет на увядающую кожу шеи, которая становится дряблой и обвисает быстрее, чем на любых других участках тела. Кожа шеи не имеет поддержки и менее эластична, следовательно, морщины в этой области становятся более заметными, чем на лице.



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА:

Тренажер для подтяжки шеи и овала лица AMG 617 работает без батареек, аккумуляторов, адаптеров и не требует наличия электросети. Его располагают под подбородком и двигая головой вниз-вверх преодолевают сопротивление пружины.

Тренажер для подтяжки шеи и овала лица AMG 617 состоит из 3-х частей: 2 части корпуса и набор из 3-х пружин, которые создают легкую, среднюю и тяжелую нагрузку и поочередно помещаются в корпус.

- Низкий уровень: красная
- Средний уровень: зеленая
- Высокий уровень: синяя

Начинать тренировки нужно с самой слабой пружины, постепенно увеличивая нагрузку. Всё что Вам надо – это снять верхнюю часть, вставить внутрь необходимую пружину, и снова собрать тренажёр.



**NECK
LIFTING**
Модель AMG617

ТРЕНАЖЕР
для подтяжки шеи
и овала лица


СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Поместите прибор так, чтобы база помещалась на начале грудины, а верхушка прибора касалась подбородка. Такое расположение прибора гарантирует получение наилучших результатов. По необходимости придерживайте базу одной рукой.



УКРЕПЛЕНИЕ ШЕИ

Медленно, наклоняя шею вперед, сгибайте ее. Замрите в нижней позиции на 2 секунды, затем также медленно разогните шею и верните в исходную позицию. Сделайте 3 подхода по 10 повторений. Между подходами делайте паузу в 5 секунд. Держите тренажер неподвижно во время всего упражнения для достижения оптимальных результатов.

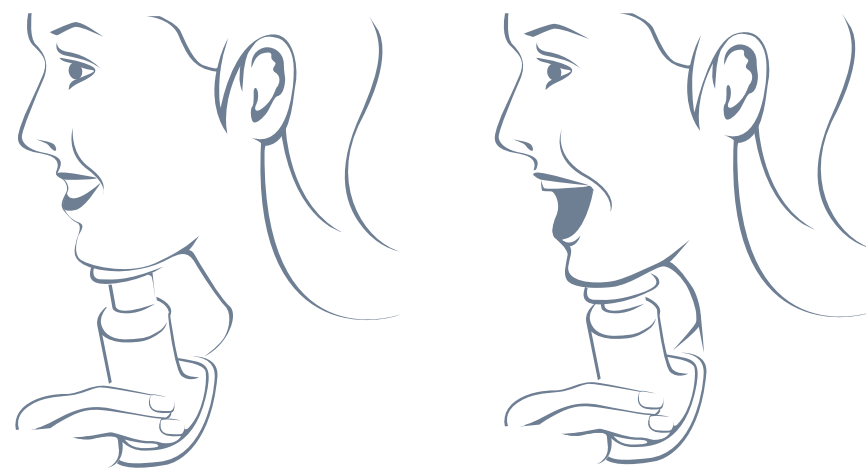


сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

УКРЕПЛЕНИЕ МЫШЦ ПОДБОРОДКА И ЧЕЛЮСТИ

1. Поместите тренажер в исходную позицию.
2. Держите голову ровно, медленно откройте челюсть до комфортного состояния. Держите челюсть открытой в течение 2 секунд, затем полностью закройте.
3. Сделайте 3 подхода по 10 повторений. Между подходами делайте паузу в 5 секунд.

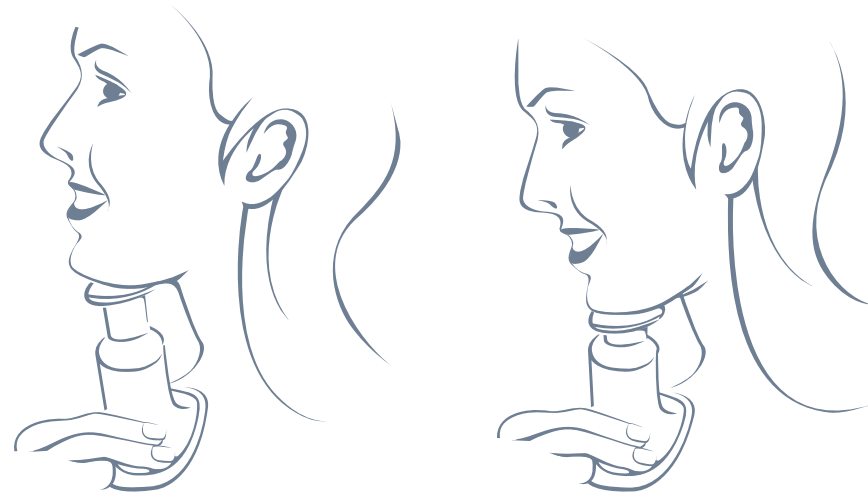

СОВЕТЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ:

- Держите плечи и спину ровно, чтобы голова и шея приняли правильное положение.
- Наклоняйте шею немного вперед, чтобы согнуть.
- Подготовьте мышцы челюсти, немного улыбнувшись прежде, чем открыть и закрыть челюсть.
- Попрактикуйтесь перед зеркалом для уверенности, что вы приняли правильное положение и все верно делаете.
- Всегда крепко держите прибор в исходном положении для достижения оптимальных результатов.



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Предотвращает появление второго подбородка
- Сокращает избыточное скопление мягких тканей (кожи и жира)
- Способствует выведению лишней жидкости и снятию отека в области второго подбородка
- Препятствует появлению «дряблых» мышц
- Корректирует мышцы шеи и подтягивает овал лица
- Подтягивает кожу, сокращая количество морщин.
- Улучшает кровообращение в шейной зоне.
- Тонизирует и подтягивает мышцы шеи.



**NECK
LIFTING**
Модель AMG617

ТРЕНАЖЕР
для подтяжки шеи
и овала лица

Для достижения идеального результата и поддержания на длительное время четкого контура овала лица и красивой шеи, компания «Созвездие красоты» рекомендует:

**Подтягивающая сыворотка для шеи Christian Breton, Paris, 30мл.
арт. 481740**

Эффективный препарат для шеи и декольте помогает уменьшить морщины и укрепляет кожу. Регулярное использование сыворотки улучшает тонус и упругость кожи, заметно подтягивает и моделирует контуры.

**Моделирующий крем для лица Beauty Style «LIPOLIFT» MODELLAGE, 150 мл,
арт. 4501816**

Интенсивное средство для избавления от «второго» подбородка и лишних жировых отложений, коррекции овала лица, подтяжки кожи. Крем обладает выраженным эффектом, подходит для мужчин и женщин.



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

ВЫГОДЫ ОТ ПРИОБРЕТЕНИЯ

С Тренажером для подтяжки шеи и овала лица AMG 617 GEZATONE Вам не придется прятать шею под шарфами, Вы будете смело демонстрировать её, не стесняясь своего возраста.

- Самый доступный прибор по соотношению цена / качество.
- Самый эффективный — результаты применения напрямую зависят от вашего желания и стремления иметь красивую шею
- Самый удобный — прибор не требует замены батареек или подзарядки аккумулятора
- Самый надежный — прослужит Вам долгие годы, конструкция прибора настолько проста, что там просто нечему ломаться
- Самый быстрый — комплекс процедур ежедневно занимает от 5 до 10 минут
- Самый компактный — он не занимает много места, его удобно брать с собой и использовать как дома, так и на работе, в дороге или на отдыхе.
- Самый продуктивный — ежедневное использование прибора обеспечит великолепный результат: четкий контур овала лица, гладкую эластичную кожу, отсутствие второго подбородка и морщин на шее.



**NECK
LIFTING**
Модель AMG617

ТРЕНАЖЕР
для подтяжки шеи
и овала лица

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- Гипертоническая болезнь;
- Сердечная недостаточность (декомпенсированная);
- Новообразования в шейно-воротниковой зоне, в челюстном отделе;
- Нестабильность шейного отдела позвоночника;
- Травмы, раны в области шеи, челюстном отделе;
- Воспалительные процессы в области шеи, челюстей, головы, верхней части спины;
- Бактериальные, грибковые инфекционные заболевания;
- Общее инфекционное заболевание в острый период;
- Наличие злокачественных новообразований.



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

Комплектация:

Тренажер Gezatone AMG617 - 1 шт

Сменные пружины - 3 шт

Инструкция по эксплуатации - 1 шт

Технические характеристики:

Максимальная/минимальная габаритная длина тренажера (без нагрузки/макс нагрузка): 140/105 мм

Кол-во режимов нагрузки/жесткости (кол-во сменных пружин): 3

Габаритные размеры в упаковке: 194x166x64 мм

Вес в упаковке: 0,22 кг

Производитель: «Gezanne I.T.C.» Saint Avertin 39 rue des Granges Galand, France / «Жезанн И.Т.С.», Сэнт Авертен, 39
рю де Гранж Галан, Франция.

Завод-изготовитель: «GREAT CATHAY PRODUCTS MFG. INC.» / «ГРЭЙТ КЭТЭЙ ПРОДАКТС МФГ. ИНК.», 2 фл, № 19,
Лейн 160, САНГ-ЧИАНГ, РД, Тайбэй, Тайвань, К.Р. / 2 fl., № 19, Lane 160, SUNG-CHIANG RD, Taipei, Taiwan R.O.C.

Импортер / уполномоченная изготовителем организация: ООО «МИТРИДАТ», Россия, г. Москва, ул. Шоссейная, д.1В,
стр.10, т. (495) 225 25 83

Применение, дата производства: см. инструкцию по эксплуатации.

Срок службы: 5 лет

Не подлежит обязательной сертификации





сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

Москва 8 (495) 120-10-80

регионы РФ: 8 (800) 200-00-34 (звонок бесплатный)

WWW.SOZV.RU

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ:

 odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty

 facebook.com/sozvezdiekrasoti

 vk.com/sozvezdiekrasoti

