

GÉZATONE

МАССАЖЕР ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА BioLIFT-4 m709





Артикул
1301089S


Многофункциональный косметический аппарат компании **Gezatone BioLIFT-4 модель m709** для комплексного интенсивного ухода за кожей лица в домашних условиях поможет создать косметический салон у Вас дома. Вы сможете сами проводить процедуры для **восстановления тонуса** и упругости кожи, разглаживания морщинок, моделирования овала лица, восстановления и оздоровления кожи.

ТРИ ПОПУЛЯРНЫЕ МЕТОДИКИ совмещены в одном компактном комбайне **BioLIFT-4 модель m709:**


- **ПОСТОЯННЫЙ ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ТОК** с изменяемой полярностью, улучшающий состояние и функции кожи.
- **МИКРОТОКИ** – это импульсный фарадический ток с изменяющейся частотой – для тонизации и лифтинга лицевых мышц.
- **МИКРОТОКИ ЛОТТИ** – импульсный синусоидальный индуцированный ток для максимально эффективной коррекции морщин (воздействие только на область морщин).

САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРИБОР

для профилактики и коррекции возрастных изменений!

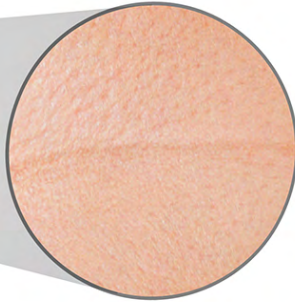

Разгладить вертикальные морщинки на лбу

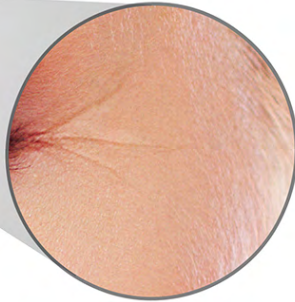

Убрать мимические морщинки вокруг глаз



Заполнить носогубные складки

Поднять уголки и очертить контур губ



Смоделировать овал лица


BioLIFT-4

ПРОЦЕДУРЫ, которые ГАРАНТИРУЮТ МОЛОДОСТЬ


- **КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ** гальванических токов и аппаратных косметических средств считается **самым эффективным решением возрастных изменений**.
- **НЕЗАВИСИМЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ** доказали, что аппарат BioLIFT-4 модель m709 действительно **эффективно омолаживает кожу**, возвращая ей красоту и свежесть.
- **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ** его использования в комплексе с грамотно выбранными заряженными косметическими средствами виден **сразу после первого сеанса**.
- Регулярные сеансы **ГАЛЬВАНОТЕРАПИИ** – это гарантия того, что **результат не исчезнет со временем**.
- Многочисленные **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ** о Gezatone BioLIFT-4 модель m709 **подтверждают его функциональность, безопасность и эффективность** в борьбе с возрастными изменениями кожи.
- Если Вы хотите **ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ** кожи, то косметический комбайн BioLIFT-4 модель m709 окажет Вам в этом **огромную помощь**.
- Пользователи более **МОЛОДОГО ВОЗРАСТА** применяют прибор **для предупреждения появления морщин**.
- **ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ** аппарата – **лицо, подбородок и зона декольте**.
- Использование BioLIFT-4 модель m709 может оказаться **АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ВАРИАНТОМ** для тех, кто собирается использовать **инъекции коллагена, филлеры или другие инвазивные меры для омоложения кожи**.




Гальванические токи

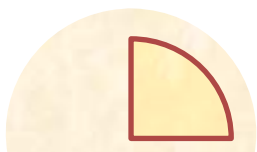

Микротоки

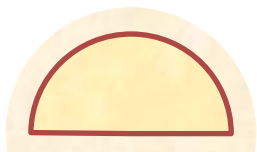

Микротоки Лотти

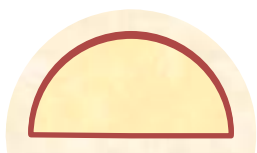

Разглаживание
морщин и борьба
со старением кожи

- Массажер для лица Gezatone BioLIFT-4 модель m709 разработан на базе трех методов, считающихся самыми результативными. Но самым главным оружием аппарата против морщин является **ВОЗДЕЙСТВИЕ МИКРОТОКАМИ ЛОТТИ – ФУНКЦИЯ РИДОЛИЗА.**

- Воздействие микротоков Лотти способно разгладить самые глубокие морщины и складки кожи, стимулируя синтез коллагена и эластина, заполнив морщину изнутри.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Результат, полученный после сеансов с Gezatone BioLIFT-4 модель m709, останется с Вами до шести месяцев, а по истечении этого времени можно будет просто повторить курс заново!



I. РЕЖИМ «ИОНОФОРЕЗ»

Применение постоянного гальванического тока регулирует обменные процессы, происходящие в коже, улучшает тонус кожи, нормализует деятельность сальных желез, усиливает питание кожи, ее влажность, способность к регенерации, а так же стимулирует выработку белков коллагена и эластина фибробластами.

При помощи постоянного гальванического тока можно проводить процедуру ионофореза, т.е. введения специальных заряженных косметических комплексов.

Введение косметических средств методом ионофореза многократно усиливает их действие и усваиваемость кожей.

В данной модели процедуры с использованием постоянного гальванического тока производятся с помощью электрода-ролика.

Использование
режима «Ионофорез»
**отрицательной
полярности**

- повышает тонус дряблой кожи;
- увлажняет кожу, восстанавливает ее тургор;
- активизирует тонус сосудов и улучшает цвет лица;
- стимулирует трофику тканей и кислородное дыхание клеток кожи;
- усиливает проникновение активных косметических средств в глубокие слои кожи.


ПРИНЦИП РАБОТЫ

Режим «Ионофорез» положительной полярности


Снимает повышенный тонус мимических мышц лица и, таким образом,

- разглаживает мимические морщины на лбу, переносице, в уголках глаз, вокруг рта;
- уменьшает раздражение и воспаление кожи;
- устраняет отеки и выводит токсины;
- снимает аллергические реакции, зуд, покраснения кожи;
- уменьшает проявления купероза, освежает кожу, способствует сужению пор;
- открывает кожные поры, расщепляет и омыляет кожный жир - себум, тем самым очищая кожу лица.


Традиционное
косметическое средство

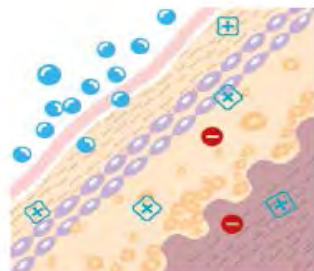

Глубокое очищение
в режиме « $\oplus$ »

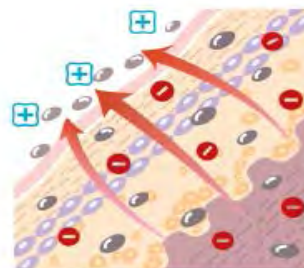

Введение косметических
средств в режиме « $\ominus$ »

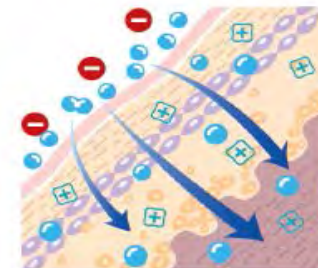

Режим «Ионофорез» переменной «+» и «-» полярности по очереди

- дает прекрасные результаты при увлажняющих процедурах (рекомендуется использовать специальные увлажняющие средства);
- стимулирует синтез собственного коллагена и эластина клетками кожи;
- восстанавливает собственные защитные функции кожи;
- усиливает регенерацию и репарацию.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

II. Режим «Лимфодренаж» и режим «Тонизация мышц»

Микротоки позволяют мягко, деликатно и очень эффективно воздействовать на функциональную активность клеток кожи, мышцы, лимфатические и кровеносные сосуды.

Для микротоковой стимуляции используются токи низкой частоты, которые восстанавливают состояние всех слоев кожи, тонизируют мышцы, нормализуют микроциркуляцию и лимфоотток, стимулируют синтез коллагена и эластина.

Микротоки оказывают на мышцы стимулирующее и укрепляющее воздействие, восстанавливают утраченный мышечный тонус, корректируют овал лица, устраняют так называемый птоз, т.е. подтягивают уголки губ, устраняют обвисание век, контур бровей.



Мышцы лица ослабли и растянулись. Лицо осунулось и выглядит угрюмо.



Аппарат BioLIFT-4 стимулирует мышцы лица, возвращая им упругость и эластичность.



Тонизированные мышцы улучшают овал лица, возвращая ему молодость и красоту.

Стимуляция лицевых мышц способствует устранению излишних жировых отложений на лице и шее, ликвидирует «второй подбородок». Работающие мышцы улучшают приток свежей артериальной крови к коже лица, устраняют застойные явления, «мешки» под глазами. **ПРОЦЕДУРА МИКРОТОКОВОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ МЫШЦ ПОЛУЧИЛА НАЗВАНИЕ «БЕЗОПЕРАЦИОННОГО ЛИФТИНГА».** Эта процедура выполняется электродами-шариками, к которым приложено переменное электрическое напряжение.


ПРИНЦИП РАБОТЫ

III. Режим «Коррекция морщин»


Метод микротоки Лотти появился в результате многолетних исследований в области косметологии и в настоящее время широко используется во многих салонах красоты и SPA-центрах. Электрод-корректор морщин в виде пружинящих иголок воздействует на кожу в дне сформировавшейся морщины, где под действием особого вида микротоков создается зона теплового эффекта. Сочетание теплового и раздражающего воздействия микротоков Лотти вызывает ответную реакцию кожи в виде многократного увеличения активности клеток-фибробластов, которые синтезируют молекулы молодого коллагена и эластина. Таким образом, после процедуры коррекции дно морщины приподнимается и выравнивается, восстанавливая ровный контур поверхности кожи. При проведении курса процедур эффект становится стойким, под дном морщины-бороздки формируется нежный валик из молодого коллагена, хорошо усваивающий влагу и обеспечивающий выравнивание кожи в течение 2-3 месяцев. Аппарат BioLIFT-4 модель m709 в режиме «Коррекция морщин», при условии его использования в четком соответствии с инструкцией, разглаживает морщины на лице естественным образом – стимулирует выработку коллагена и эластина. Результат, достигнутый благодаря правильно подобранной программе процедур, может сохраняться несколько месяцев. Аппарат так же можно использовать в целях профилактики появления морщин.




Первоначальное состояние кожи

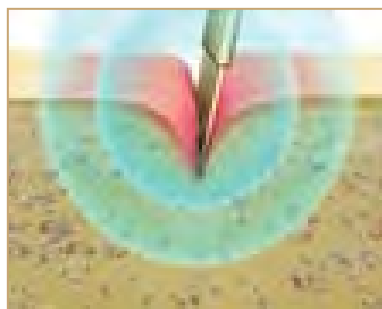

Воздействие тепла и микротоков на дно морщины

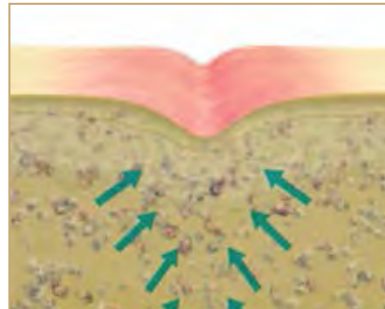

Синтез коллагена и эластина

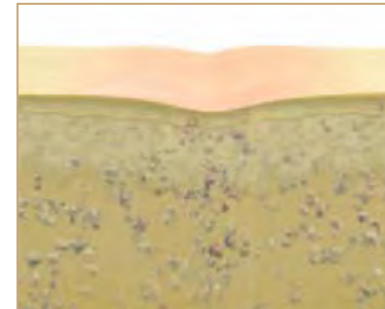

Эффект после курса процедур

ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА



ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУР

I. РЕЖИМ «ИОНОФОРЕЗ»

Процедуры воздействия гальваническим током проводятся по электропроводящему гелю или по сильно увлажненной минеральной водой коже, можно использовать специальные заряженные под «+» или «-» препараты для ионофореза, что обеспечивает дополнительный эффект процедуры.

В режиме гальванического очищения (ION+) рекомендуется наносить на кожу минеральную воду или водно-содовый раствор (1чл соды на стакан воды).

При наличии купероза Вы можете использовать специальный противокуперозный комплекс «Комфорт», имеющий заряд «+».

В режиме ионофореза (ION-) для омоложения, увлажнения, питания кожи необходимо использовать специальные заряженные комплексы Beauty Style, имеющие заряд «-».

В режиме гальванического лифтинга (ION+/-) рекомендуется применять электропроводящий гель на водной основе, например, гель «Ультралифт» Beauty Style или гель для лица с экстрактом икры Beauty Style.

ПРОЦЕДУРУ ПРОВОДИМ ПЛАВНЫМИ СКОЛЬЗЯЩИМИ ДВИЖЕНИЯМИ
СТРОГО ПО МАССАЖНЫМ ЛИНИЯМ

Лоб. Массажные движения выполняются снизу вверх, от центра к периферии, начиная от межбровного пространства, как показано на рисунке.

Боковые поверхности лица. Массажные движения выполняются снизу вверх от подбородка к вискам.

Зона под глазами (носогубный треугольник, щеки, область скул).

Область шеи. Движения выполняются в направлении снизу вверх, избегая зоны проекции щитовидной железы.

«Двойной подбородок». Движения проводятся в направлении от центра подбородка к уху.



Мешки / «синяки» под глазами. Движения выполняются от центра лица к уху, дугообразно огибая параорбитальную область глаз. Не рекомендуется приближаться к главному яблоку.

Носогубные морщины. Движения должны выполняться по щекам наружу в направлении по диагонали, разглаживая морщины.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУР

II. РЕЖИМ «ЛИМФОДРЕНАЖ» И «ТОНИЗАЦИЯ МЫШЦ»

- Вторым этапом процедуры является воздействие стимулирующими микротоками на участках с выраженным птозом, т.е. с обвисанием контуров лица, а также для профилактики изменения контура лица.
- Чаще всего обвисание формируется в нижней части лица (овал лица, шея, щеки, уголки губ, подбородок). В верхней части лица птозу подвержены веки и линия бровей.
- Желательно применять специальный гель на водной основе, например, гель «Ультралифт» Beauty Style.
- Токопроводящий гель на водной основе наносится на все выбранные зоны и добавляется по мере необходимости в течение процедуры.
- Перед началом воздействия выберите схему воздействия, учитывая выраженность птоза на различных участках лица (насадку электроды-шарики располагайте вдоль мышечных волокон, медленно передвигайте их по указанным линиям).
- Эффект выровненного контура кожи держится 2-3 месяца.
- Возможно проведение 3-4 полных курсов коррекции в год.
- Затем поддерживающие процедуры 1-2 раза в неделю.

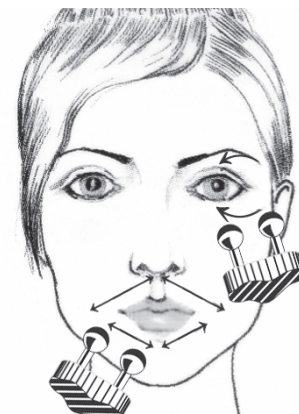
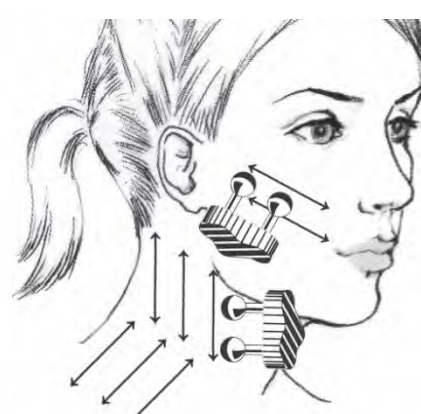


ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУР


III. РЕЖИМ «КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН»

По окончании курса воздействия гальваническим постоянным током и тонизации мышц проводится курс коррекции морщин-бороздок (это те глубокие морщины, которые не исчезают при полном расслаблении мышц).

- Воздействие электродами-иглочками проводится по 15-30 сек. на каждую зону, перемещая электрод вдоль морщины по звуковому сигналу.
- Предварительно очистите кожу в зонах воздействия. Хорошее увлажнение только улучшит результат.
- Процедуры коррекции морщин проводятся по коже, увлажненной минеральной водой.
- Во время проведения процедуры необходимо четко зафиксировать электроды в основании морщины и не допускать никаких перемещений.
- В перерывах между использованием микро-электродов пальцем массируйте обрабатываемую зону.
- После обработки морщины ее рекомендуется помассировать кончиками пальцев 2-3 минуты.
- Время процедуры 10-15 мин., выполняются они через день.
- Если морщина представляет собой целую линию, повторите весь цикл по всей ее длине для достижения одинакового эффекта по всей зоне воздействия аппарата.
- В зависимости от количества и глубины морщин курс составляет от 10 до 20 процедур.

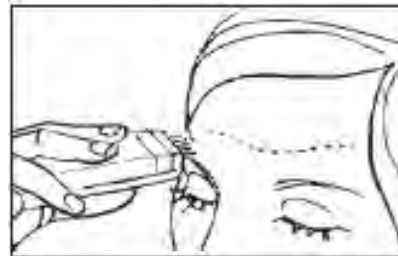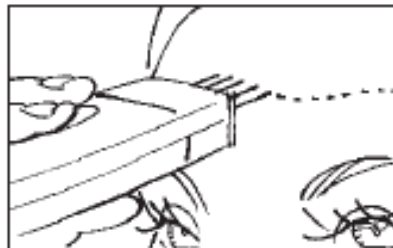

Проводится это воздействие только на сформировавшиеся морщины-борозды, которые не зависят от мимики и не исчезают даже при полном расслаблении мышц.

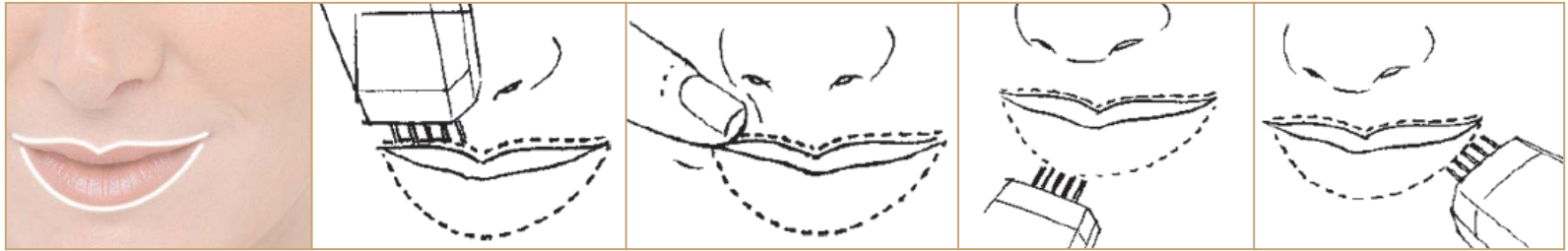СХЕМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУР
Линия губ

Морщины в области носогубных складок

Область вокруг глаз

Область лба






ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Системные заболевания соединительной ткани (системная красная волчанка, склеродермия и т. д.).
- Склонность к образованию келоидов.
- Злокачественные новообразования кожи.
- Онкологические заболевания.
- Острые и хронические заболевания кожи (экзема, псориаз и проч.).
- Тяжелые формы гипертонической болезни и ИБС.
- Простуда, грипп, ОРВИ в активной фазе.
Прием болеутоляющих, успокоительных лекарств, алкоголя.
- Герпетическая вирусная инфекция в стадии обострения.
- Острые воспалительные процессы кожи.
- Аллергическая реакция любого генеза в стадии обострения на момент проведения процедуры.
- Нарушение целостности кожных покровов, дерматологические заболевания, наличие ожогов, ссадин, царапин на обрабатываемой поверхности кожи.
- Аллергическая реакция на металл.
- Сердечно-сосудистые заболевания, наличие кардиостимулятора.
- Эпилепсия и другие заболевания ЦНС. Сахарный диабет.
- Беременность.
- Возраст до 18 лет.
- Подкожные имплантаты.



При наличии металлических зубных протезов, брекетов и т.п. рекомендуется проложить между щекой и десной кусочек изолирующего материала (тонкий пластик, пленка).

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

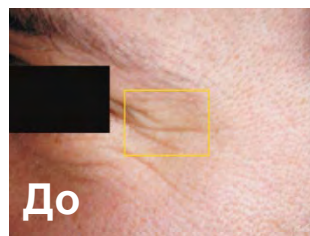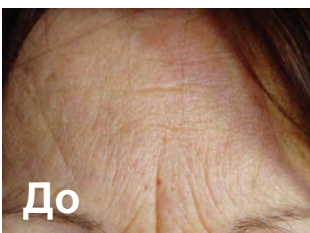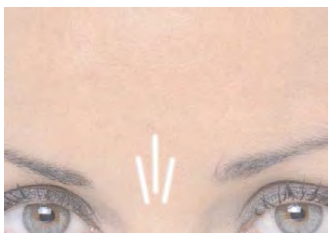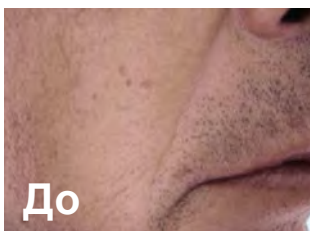Область губ*Область
вокруг глаз**Межбровные
морщины**Морщины в
области
носогубных
складок*

Положительный эффект становится заметным спустя уже 20-30 минут. Воздействие на контур губ сделает его четким, ровным и позволит отказаться от использования контурного карандаша при нанесении макияжа. Отныне Вам нужно будет использовать меньше тонального крема для создания основы под макияж, чтобы скрыть мелкие морщины.

Используя BioLIFT-4 в режиме «Коррекция морщин» в области проявления межбровных морщин, Вы сможете добиться заметных результатов уже через две недели.

Проведение процедуры в области носогубных складок поможет Вам восстановить тонус и упругость, присущие молодой коже.

ПРОЦЕДУРЫ С ПОМОЩЬЮ АППАРАТА BIO LIFT-4 M709 ЯВЛЯЮТСЯ ПРОСТЫМ И ЭФФЕКТИВНЫМ СПОСОБОМ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование: m709 Массажер по уходу за кожей лица Gezatone

Артикул: 1301089S

Напряжение питания DC: 9 В (от сетевого адаптера)

Ток потребления не более: 100 мА

Максимальная потребляемая мощность: 0,5 Вт

Параметры выходного сигнала в режимах:

– «Ионофорез»	0,7 - 3 мА
– «Тонизация мышц»	150 - 650 мкА
– «Лимфодренаж»	30 - 130 мкА
– «Коррекция морщин»	0,2 - 1,8 мА

Диапазон рабочих температур : +15 ... 35°C при влажности 20 ... 85%.

Размеры упаковки: 240 x 230 x 65 мм.

Масса в упаковке: 0,55 кг.

ШК (EAN13): 3004564029931

Срок службы : 5 лет.

Гарантия: 1 год.

ВЫГОДЫ ОТ ПРИОБРЕТЕНИЯ

**ИНЪЕКЦИИ ПОДОЖДУТ**

Использование Gezatone BioLIFT-4 модель m709 может оказаться **альтернативным вариантом для тех, кто собирается использовать инъекции коллагена, филлеры** или другие инвазивные методы омоложения кожи.

Коллаген и эластин вырабатываются в организме естественным способом, а не поступают извне, что еще раз подчеркивает безопасность метода.

Многочисленные положительные отзывы о Gezatone BioLIFT-4, модель m709 подтверждают его функциональность, безопасность и эффективность в борьбе с возрастными изменениями кожи!

Видимый результат вы получите уже после первого сеанса, однако курс регулярных процедур даст Вам возможность «накопить» положительную реакцию кожи.



Прибор Gezatone BioLIFT-4, модель m709 позволит Вам **значительно сэкономить время и деньги** – Вы получаете три полноценные омолаживающие методики для лица в одном аппарате! Не нужно тратить деньги на дорогостоящие салонные процедуры – теперь у Вас есть свой личный мини-салон красоты на дому!

БЛАГОДАРЯ АППАРАТУ GEZATONE BioLIFT-4 m709 ВАША КОЖА ЗАСИЯЕТ МОЛОДОСТЬЮ И КРАСОТОЙ!



сеть фирменных магазинов
СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

Москва 8 (495) 120-10-80
регионы РФ: 8-800-500-95-94 (звонок бесплатный)

www.sozv.ru

Присоединяйтесь:

 www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty

 facebook.com/sozvezdiekrasoti

 vk.com/sozvezdiekrasoti