


**Гидромассажная ванна для ног  
FS 883**

Инструкция по применению - Внимательно ознакомьтесь!

8887 FS883 V1.2 07/2016

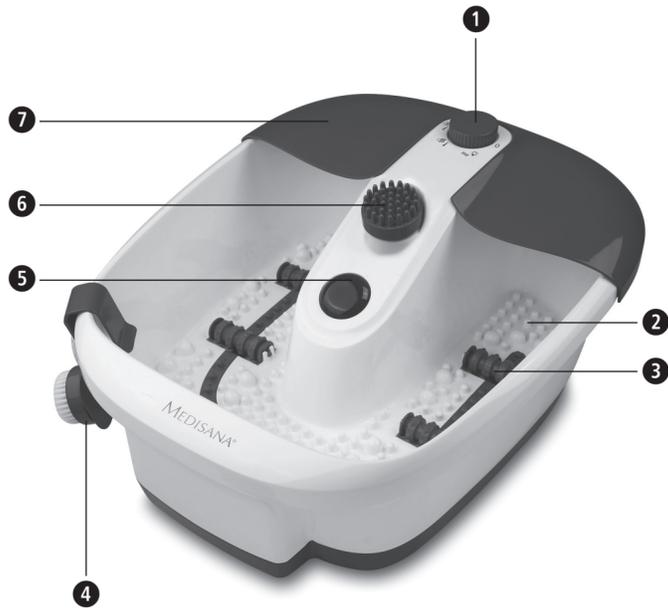

Не предназначен для маленьких детей (до 3 лет)!

Пояснение символов

**ВАЖНО IMPORTANT**  
Несоблюдение инструкции может привести к тяжелым травмам или повреждению прибора.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**  
Во избежание возможных травм пользователя необходимо строго соблюдать эти указания.

**ВНИМАНИЕ**  
Во избежание возможных повреждений прибора необходимо строго соблюдать эти указания.

**УКАЗАНИЕ**  
Эти указания содержат полезную дополнительную информацию о монтаже или работе.

Класс электробезопасности II

**LOT**  
Номер LOT

**Производитель**



**RU** Указания по безопасности  
 Прежде чем начать пользоваться прибором, внимательно прочтите инструкцию по применению, особенно указания по технике безопасности. Сохраните инструкцию. Если Вы передаете прибор другим лицам, передайте также инструкцию.



**Электроснабжение**

- Прежде чем подключить аппарат к электросети, убедитесь в том, чтобы указанное на табличке технических характеристик прибора сетевое напряжение соответствовало напряжению в Вашей электросети.
- Подключать штепсель к сети электроснабжения разрешается только, когда переключатель функций прибора находится в положении Выкл.
- Запрещается использовать устройство в случае, если поврежден сетевой кабель. В целях безопасности замена сетевого кабеля должна производиться авторизованной сервисной службой.
- Не беритесь руками за штепсель, если вы стоите в воде. Прикасаясь к штекеру всегда только сухими руками!
- Не пытайтесь вытаскивать руками упавший в воду электроприбор. В данном случае – немедленно вытащите штепсель из розетки!
- Не подносите ни прибор, ни его сетевой кабель близко к горячим объектам.
- Никогда не носите, не тяните и не крутите прибор за сетевой кабель и не зажимайте его.
- Следите за тем, чтобы сетевой кабель не был натянут и не привел к падению прибора.
- Поставьте переключатель в положение Выкл после окончания использования прибора и вытащите штепсель из розетки.

**Для людей с ограниченными возможностями**

- Это устройство может использоваться детьми с 8 лет и старше, а также людьми с пониженными физическими, сенсорными или психическими способностями или недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или их ознакомили с безопасным использованием устройства, и они осознают исходящие от устройства опасности.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Дети до 3 лет не должны пользоваться этим устройством, так как они неспособны реагировать на перегрев.
- Запрещается пользоваться данным прибором маленьким детям в возрасте старше 3 лет, если только функциональный выключатель не был соответствующим образом отрегулирован родителями или лицами, осуществляющими контроль, а также, если ребенок был в достаточной мере проинструктирован в отношении безопасного использования данного прибора.
- Обратитесь к врачу, если в процессе использования прибора возникнут какие-либо жалобы по состоянию здоровья. В данной ситуации необходимо немедленно прекратить дальнейшую эксплуатацию прибора.
- Если Вам был поставлен врачебный диагноз заболевания ног, вен или диабета, то Вам необходимо обратиться к врачу, прежде чем начать использование данного прибора.
- При необъяснимых болях или отеках в ногах или ступнях, а также после мышечных травм, Вам необходимо посоветоваться с врачом, прежде чем начать использование данного прибора.
- Во время беременности также рекомендуется предварительная консультация у врача перед началом использования прибора.
- Прекратите массажные процедуры, если Вы почувствуете боли во время использования прибора или если после процедур появятся отеки.

- Прибор имеет горячую поверхность. Людям с пониженной термочувствительностью следует пользоваться устройством с особой осторожностью.

**Использование прибора**

- Используйте данный аппарат только согласно его предназначению и в соответствии с руководством по его эксплуатации. В случае применения прибора не по назначению, гарантийные обязательства поставщика будут аннулированы.
- Запрещено использовать прибор в коммерческих целях. Он предназначен исключительно для использования в быту.
- Не используйте аппарат на открытом воздухе или в сырых помещениях.
- Для эксплуатации прибора, поставьте его на пол или на устойчивую, ровную и не чувствительную к воздействию влаги поверхность.
- Заполняйте устройство только водой и не пользуйтесь другими жидкостями.
- Используйте только подходящие средства для ванн, запрещены пенящиеся средства и соли для ванн.
- Не вставляйте в полный рост, поставив ноги на аппарат, поскольку он не рассчитан на нагрузку массы тела взрослого человека.
- Никогда не накрывайте аппарат во время работы.
- Если возникла утечка воды из устройства, запрещается дальнейшая эксплуатация.

**Уход и чистка**

- Не ремонтируйте прибор самостоятельно. В противном случае возможно не только снятие гарантии производителем, но и возникновение серьезных последствий (пожар, удар током, травмы). При обнаружении неполадок обратитесь в авторизованную сервисную службу.
- Очисткой и самостоятельным обслуживанием не должны заниматься дети без присмотра.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Если все же жидкость проникнет во внутренности прибора, немедленно вытащите штепсель из розетки.

**Прибор и органы управления**

- 1 Поворотный переключатель:
  - 0 = ВЫКЛ;
  - = ВИБРОМАССАЖ + ИК-ИЗЛУЧЕНИЕ;
  - = ПУЗЫРЬКОВЫЙ ГИДРОМАССАЖ + ПОДОГРЕВ;
  - = ПУЗЫРЬКОВЫЙ ГИДРОМАССАЖ + ВИБРОМАССАЖ + ПОДОГРЕВ + ИК-ИЗЛУЧЕНИЕ

- 2 Массажные шарики
- 3 Массажные ролики (съёмные)
- 4 Держатель насадок
- 5 Инфракрасная лампа
- 6 Отверстие для насадок
- 7 Съёмный брызгозащитный козырек

**Комплектация и упаковка**

- Проверьте комплектность прибора и отсутствие повреждений. В случае сомнений не вводите прибор в работу и отошлите его в сервисный центр. В комплект входят:
- Ванночка для ног **MEDISANA**, 1 шт.
  - Сменные насадки для педикюра, 3 шт. (пемза, щетка и массажная насадка)
  - Держатель насадок, 1 шт.
  - инструкция по применению, 1 шт.

Упаковка может быть подвергнута вторичному использованию или переработке. Ненужные упаковочные материалы утилизировать надлежащим образом. Если при распаковке Вы обнаружили повреждение вследствие транспортировки, немедленно сообщите об этом продавцу.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**  
Следите за тем, чтобы упаковочная пленка не попала в руки детям. Опасность удушья!

**Благодарим**

Вас за доверие и поздравляем с покупкой!

**Гидромассажная ванна для ног MEDISANA** поможет снять усталость ног после утомительного дня. Вы можете принимать ванны для ног с массажем в течение 10-15 минут один или два раза в день. Однако, Вам следует при этом следить за тем, чтобы прибор полностью охладился после его эксплуатации, прежде чем Вы снова начнете процедуры! Гидромассажная ванночка для ног **MEDISANA** пригодна для использования с водой. Вы можете наполнить устройство теплой или холодной водой. Функция подогрева не рассчитана на то, чтобы разогревать наполняемую воду, а служит лишь для того, чтобы предотвратить ее быстрое охлаждение.

**ВНИМАНИЕ:** Убедитесь, что Ваша гидромассажная ванна для ног **MEDISANA** установлена на устойчивой и ровной поверхности, которая нечувствительна к воздействию влаги. Не используйте пенящиеся средства для принятия ванны или соли.

**Руководство по эксплуатации**

Наполните аппарат теплой или холодной водой вплоть до обозначенной на внутренней стороне ванны линии уровня воды. Поставьте аппарат на ровную поверхность и вставьте штепсель в розетку. Сядьте в удобное положение и с помощью переключателя 1 выберите подходящий режим.

- Выберите режим **ПУЗЫРЬКОВЫЙ ГИДРОМАССАЖ + ВИБРОМАССАЖ + ПОДОГРЕВ + ИК-ИЗЛУЧЕНИЕ** для точечного массажа стоп благодаря вибрации массажных роликов 2 на дне ванночки и одновременного подогрева воды до комфортной температуры и живительного гидромассажа ног пузырьками. Также данный режим активирует инфракрасную лампу 5, обеспечивающую глубокое прогревание.
- Режим **ПУЗЫРЬКОВЫЙ ГИДРОМАССАЖ + ПОДОГРЕВ** запускает гидромассаж и функцию подогрева воды.
- Режим **ВИБРОМАССАЖ + ИК-ИЗЛУЧЕНИЕ** активирует функцию массажа специальными роликами 2, а также инфракрасную лампу 5. Данный массаж можно проводить как в пустой, так и в наполненной водой ванночке.

После использования переведите переключатель 1 в положение 0 (ВЫКЛ). Отключите от сети и при необходимости слейте воду. Для опорожнения наклоните устройство таким образом, чтобы вода вытекала через заднее сливное отверстие.

**Дополнительное использование для массажа**

Гидромассажная ванночка для ног **MEDISANA** кроме вышеописанных возможностей позволяет Вам использовать ее для массажа с применением воды без включения устройства. Массажные ролики 2: массируйте стопы с помощью специальных роликов с комфортной для Вас интенсивностью. Такой массаж стимулирует кровообращение и снимает усталость ног.

**Дополнительные насадки для педикюра**

В комплекте с гидромассажной ванной **MEDISANA** дополнительно поставляются три насадки для педикюра. Вставьте одну из насадок – пемзу, щетку или массажную насадку, - в специальное отверстие 6. Остальные неиспользуемые насадки можно установить на держателе 4. Водите стопами плавными движениями по насадке, установленной в специальном отверстии 6. Не надавливайте слишком сильно. Изменяйте положение ног для обработки желаемого участка стопы. Щетка и массажная насадка предназначены для расслабляющего массажа стоп, а пемза – для аккуратного удаления ороговевших участков кожи.

**УКАЗАНИЕ**  
Насадка «пемза» быстрее справляется с отшелушиванием мертвых клеток кожи, размягченной после ванночки.

**Чистка и уход**

- Прежде чем Вы будете чистить аппарат, убедитесь, что он выключен и штепсель вынут из розетки.
- Слейте воду и протрите уже остывшую ванночку салфеткой и при необходимости обработайте дезинфицирующим средством.
- Для чистки ванны запрещается использовать растворители или абразивные моющие средства, в противном случае есть опасность повреждения поверхности.

- Храните аппарат в сухом, прохладном месте.
- Аккуратно сверните кабель для предотвращения возможных повреждений.

**Указание по утилизации**

Запрещается утилизировать данный прибор вместе с бытовыми отходами. Каждый потребитель обязан сдавать все электрические и электронные приборы независимо от того, содержат ли они вредные вещества или нет, в городские приемные пункты или предприятия торговли, чтобы обеспечить их экологичную утилизацию. По вопросам утилизации обращайтесь в коммунальные службы или к дилеру.

**Технические характеристики**

Наименование и модель: Гидромассажная ванночка для ног **MEDISANA**, модель FS 883  
 Электропитание: 230V~ 50Hz  
 Номинальная мощность: 80 Вт  
 Габаритные размеры: примерно 41 x 35 x 18,5 см  
 Вес: примерно 1,5 кг  
 Артикул: 88387  
 Номер EAN: 40 15588 88387 3

В ходе постоянного совершенствования прибора возможны технические и конструктивные изменения.

Последняя версия данной инструкции приведена на сайте [www.medisana.com](http://www.medisana.com)

**Гарантия/условия ремонта**

В гарантийном случае обращайтесь в торговую организацию или непосредственно в сервисный центр. В случае необходимости отправки прибора укажите неисправность и приложите копию торгового чека. При этом действуют следующие условия гарантии:

1. На изделия **MEDISANA** предоставляется гарантия сроком 3 года с даты продажи. В гарантийном случае дата продажи должна быть подтверждена торговым чеком или счетом.
2. Неисправности, вызванные дефектами материалов и изготовления, бесплатно устраняются в течение гарантийного срока.
3. Предоставление гарантии не вызывает продления гарантийного срока, ни для прибора, ни для замененных деталей.
4. Из гарантии исключены:
  - a. Все неисправности, вызванные ненадлежащим обращением, например, несоблюдением инструкции по применению.
  - b. Повреждения, вызванные действиями покупателя или неправомочных третьих лиц.
  - c. Повреждения, полученные при транспортировке от изготовителя к потребителю или при отправке в сервисный центр.
  - d. принадлежности, подверженные нормальному износу.
5. Ответственность за прямой или косвенный ущерб, вызванный прибором, исключена и в том случае, если неисправности прибора признаны гарантийным случаем.

**MEDISANA AG**, Jagenbergstraße 19,  
41468 NEUSS, ГЕРМАНИЯ

По вопросам обслуживания, принадлежности и запасных частей обращайтесь по адресу:

**ООО МЕДИСАНА РУС**  
 ул. Нагорная 20-1, 117186 Москва, Россия  
 тел: + 7 495 729 47 96;  
 eMail: [info@medisana.ru](mailto:info@medisana.ru);  
 Internet: [www.medisana.ru](http://www.medisana.ru)